

○シーネ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

- ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者

<使用方法>

- 再使用禁止

【重要な基本的注意】


- (1) 過度な操作により、副線のろう付部が破損、脱落することがあるので、取扱いは慎重に行うこと。
- (2) 口腔内での副線の脱落は、誤飲・誤嚥につながる可能性があるため、施術の際は細心の注意を払って行うこと。

【形状・構造及び原理等】*

【形状・構造】

形状：直線状

部分図

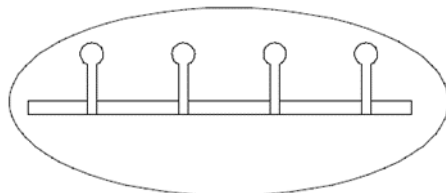

寸法：全長 130mm

副線間隔 10mm（12 本）

材質：ニッケルクロム合金

銀ろう

原理：固定部の唇頬側面に合わせて屈曲した本品を、顎骨固定用歯牙結紮線で結紮して固定を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタデンタルプロダクツ

電話番号：0287-29-2221

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com

【使用目的又は効果】

損傷した身体部位を固定するために用いる器具をいう。身体に合うよう形造る。

【使用方法等】

- (1) 本品を直接口腔内唇頬側面に適合、屈曲します。
- (2) 副線部は、上、下顎とも歯根方向に適合させます。
- (3) 副線は臼歯部のみ外側へ曲げてありますが、更に曲げる必要のあるときは、三又プライヤーなどで屈曲してください。
- (4) 適合後、顎骨固定用歯牙結紮線で各歯牙へ結紮固定します。
- (5) 上下顎の副線間で顎間固定を行ってください。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
- (2) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した粉塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
- (3) 本品は再使用しないこと。

【使用上の注意】*

【使用注意】（次の患者には慎重に適用すること）

ニッケル又は本品成分及び類似成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また、本品の使用により発疹などの過敏症があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。