

MMシーネ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：直線状

部分図

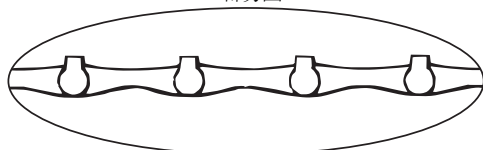

寸法：全長 128mm

副線間隔 8mm（16 本）

材質：ニッケルクロム合金

【使用目的又は効果】

損傷した身体部位を固定するために用いる器具。身体に合うよう形造る。

【使用方法等】

1. 本品を口腔内唇頬側面に沿って適合、屈曲します。
2. 副線部は、上、下顎とも歯根方向に適合させます。
3. 適合後、顎骨固定用歯牙結紮線で各歯牙へ結紮固定します。
4. 上下顎の副線間で顎間固定を行ってください。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
2. 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した粉塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
3. 本品は再使用しないこと。

【使用上の注意】

[使用注意（次の患者には慎重に適用すること）]

ニッケル又は本品成分及び類似成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また、本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ
電話番号 0287-29-2221

[問い合わせ窓口]

株式会社モリタ お客様相談センター
電話番号 0800-222-8020（無料）
Fax 番号 0800-222-6480（無料）
E-mail e-customer@morita.com