


販売名 CrYP t i t i S (クリプティティス) 消息子

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となりますので、絶対に行わないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

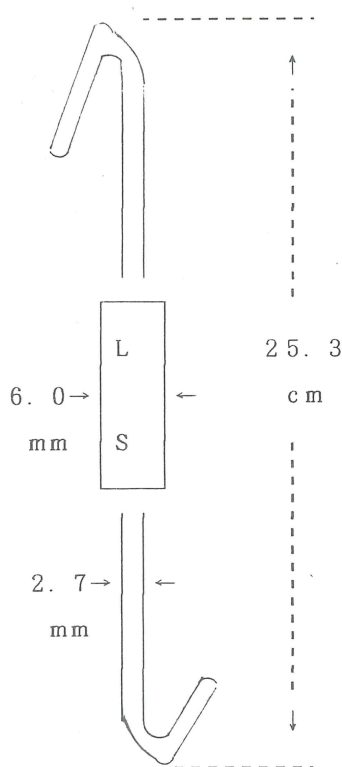

【使用目的】

金属製又は軟性材料製で、細い棒状の手術器具をいう。
洞、瘻、その他の空洞又は創部を探索するために用いる。

【品目仕様等】

1. ステンレス鋼棒 J I S G 4303
を研磨加工で仕上げる。
2. 許容誤差は、±2.0 mm
- 3.

【操作方法又は使用方法等】

1. 金属製又は軟性材料製で細い棒状の手術器具をいう。
洞、瘻、その他の空洞又は創部を探索するために用いる。
2. 使用前に必ず洗浄、滅菌（保守・点検に係る事項参考）
をしてください。
3. 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用
しないで下さい。また、使用時に必要以上の力（応力）を
加えると、曲がり、折損等の原因になりますのでご注意く
ださい。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が
乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬して下さい。

【貯蔵方法】

1. 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐた
めに保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をしてください。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去
し、職業感染防止のために消毒をしてください。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、
適正な濃度で使用してください。
3. 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをしてください、仕上げ
すすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いるこ
とをお薦めします。
4. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥してください。
5. 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検
をしてください。

【滅菌方法】

1. 使用前に必ず洗浄、乾燥後オートクレーブで（設定条件は、
121℃・1.2 kg f/cm²・20分間）で滅菌して下さい。
2. 再使用の場合は滅菌が必要である。

【包装】 1個（袋）

【製造業者】

有限会社 安田製作所

☎ 124-0013

東京都葛飾区東立石3-18-9

☎ 03-3697-1811

【製造販売業者】

有限会社 安田製作所

☎ 124-0013

東京都葛飾区東立石3-18-9

☎ 03-3697-1811