

＊ 2018年 8月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2015年 2月（第1版）

製造販売届出番号：11B1X1000651M101

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 チューブ取り外し用ウェッジ（44345000）

スージー ハグ

【警告】


＜使用方法＞

クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）の患者、又はその疑いのある患者に使用した器具を再使用する場合には、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。
[感染予防のため]

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造等〕

1. 形状

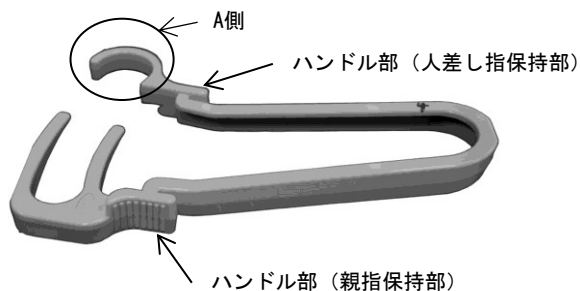

2. 材質・組成

POM樹脂

【使用目的又は効果】

呼吸装置のコネクタを接続端もしくはチューブ（気管チューブ又は気管切開チューブ等）のコネクタから外す際に用いる器である。

【使用方法等】

1. 使用に先立って付着した残存物等を取り除く。なお、汚れが酷い場合には薬剤による清拭を実施する。
2. 以下に従い操作する。
 - ①親指と人差し指でハンドル部を保持する。
※上下逆さまでは使用できない為、向きに注意すること。
※ハンドル部以外を保持しないこと。〔破損の恐れがある。〕

※呼吸装置、気管チューブ又は気管切開チューブの形状によっては、一部使用できない場合もあるので確認すること。

- ②呼吸装置の15mmコネクタに本品のA側を押し当て、ハンドル部を握ることでチューブをコネクタから外す。



3. 【使用上の注意】及び【保管方法及び有効期間等】に従う。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 感染症等の原因となる為、一度使用した器具を他の患者には使用しないこと。
2. 本品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
3. 破折等の恐れがあるので、以下は行わないこと。
 - ①本品に対する曲げ・切削・加圧等。
 - ②粗雑な扱い。（キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等）
4. 薬液等が付着した場合、劣化する恐れがあるので速やかに清拭すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の方法＞

・保管の条件

1. 高温・多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 破損、変色又は異臭の原因となる為、紫外線保管庫による保管は行わないこと。
3. 変形の原因となるので、トレー・コンテナによる移動及び保管は丁寧に行うこと。なお、トレーやコンテナを使用する際は重い器具を載せないこと。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項（日常点検）＞

1. 使用に先立って付着した残存物等を取り除くこと。なお、汚れが酷い場合には薬剤による清拭を実施する。
2. 使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。

＜注意事項＞

1. オートクレープ滅菌は、本品を劣化させるので行わないこと。
2. アルコール等の薬剤を用いるオートクレープ滅菌は、金属を腐食させるので行わないこと。
3. プラズマ滅菌は、素材に影響を及ぼすので行わないこと。
4. 紫外線滅菌は、素材に影響を及ぼすので行わないこと。
5. 製品を劣化させる恐れがあるので、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
6. 家庭用洗剤は、着色料や香料が含まれており、それらの残存物が本品を劣化させることがあるので使用しないこと。洗浄する際は、医療用防錆洗浄剤を使用すること。
7. 劣化等の原因となるので、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 : 株式会社YDM

住 所 : 〒355-0042

埼玉県東松山市今泉28

電話番号 : 0493-24-3388

ファックス : 0493-24-0703

ホームページ : <http://www.ydm.co.jp/>

販売元（問い合わせ窓口）

コヴィディエンジャパン株式会社

カスタマーサポートセンター

: 0120-998-971