

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント (41059000)

GH ストップフック

再使用禁止

※【禁忌・禁止】

- 1) 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- 3) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 1) 本品は以下の構造をもち、表に記載する種類を有する。

①スライドバーチカルチューブ



種類	穴径	品番
.017×.025	0.4×0.6mm	V-T1725
.019×.025	0.5×0.6mm	V-T1925

②SHフック



4mm



2.6mm

種類	長さ	厚さ	品番
4mm	8.6mm	0.02mm	SHPHK4
2.6mm	11.4mm		SHPHK6

③サージカルフック



Slide-On




Open-Wall

種類	穴径	ボール径	品番
Slide-On .018×.025	0.5×0.6mm	1.3mm	SURHK620C
Slide-On .022×.028	0.6×0.7mm		SURHK621C
Open-Wall (Universal)	—		SURHK

ボールと穴部との距離：4mm

④クリンパルマイクロストップ

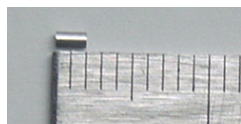

種類	長さ (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	穴の 形状
Small (Round)	2.0	0.5	0.8	円形
Large (Rectangular)		0.7	1.0	方形

種類	品番
Small (Round)	CSTOPSM
Large (Rectangular)	CSTOPLG

⑤アーチフック



Slide-On



Open-Wall

種類	穴径 (mm)	ボール径 (mm)	品番
Slide-On .018×.025	0.5×0.6	0.8	ARHK632C
Slide-On .022×.028	0.6×0.7		ARHK633C
Open-Wall, right .018×.025	0.5×0.6		ARHK630CR
Open-Wall, right .022×.028	0.6×0.7		ARHK631CR
Open-Wall, left .018×.025	0.5×0.6		ARHK630CL
Open-Wall, left .022×.028	0.6×0.7		ARHK631CL

ボールと穴部との距離：3mm

⑥クリンパルスストップ



種類	長さ	品番
2mm long	2mm	CSTOPOW

- 2) 成分・分量
ステンレス鋼

- ※3) 仕様
硬さ：ビッカース硬度が 200HV 以下であること。

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

ブラケットに接続し、歯または維持バンドにセットした矯正用スプリングや矯正用ワイヤに適切な力が働くようする。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ① 歯列矯正用器材作製の際には破折を避けるため、繰り返し
の屈折は行わないこと。
 - ② 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止
すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれ
た患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - ② 本材に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、
手袋などを用い、直接本材に触れないようにすること。
 - ③ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれ
た術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

※製造業者：G&H Wire Company, Inc.
製造先国名：アメリカ合衆国