


機械器具58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具(70722000) [歯科用インプラント手術器具(70965001)]

インプラント シュリッテン

【形状・構造及び原理等】

(1)インプラント シュリッテンの形状、構造は以下のとおり
(単位：mm)

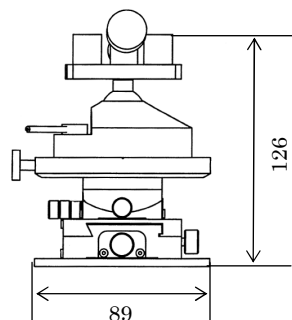

(2)その他構成品の材質及び形状は以下のとおり
<材質>

構成品名	材質
IS チタンマーカー	純チタン
IS 3.25mm測定ロッド	ステンレス
IS 2.60mm測定ロッド	ステンレス
IS 2.40mm測定ロッド	ステンレス
IS 咬合面ストッパー	アクリル
IS 咬合平面表示棒	ポリスチレン

<形状>

構成品名	形状	寸法
IS チタンマーカー	管状	$\phi 4.0 \times \phi 3.3 \times 10$ (10mm) $\phi 4.0 \times \phi 3.3 \times 15$ (15mm)
IS 3.25mm測定ロッド	棒状	$\phi 3.25 \times 40$
IS 2.60mm測定ロッド	棒状	$\phi 2.60 \times 45$
IS 2.40mm測定ロッド	棒状	$\phi 2.40 \times 45$
IS 咬合面ストッパー	棒状	$\phi 5.0 \times 180$
IS 咬合平面表示棒	棒状	$\phi 3.0 \times 180$

(3)セット品については以下の製品を予め組み合わせている

構成品名	材質
IS チタンドリルガイド	純チタン
IS 埋入方向指示棒	ステンレス
IS 埋入位置指示ピン セット	ステンレス 熱収縮チューブ
IS 着脱ロッド	ステンレス
IS 埋入方向指示棒固定バー	ステンレス

※上記製品については「外科手術ガイド製作キット」（歯科用インプラント手術器具、23B1X10001A58030）の構成品である。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる。

【使用方法等】

X線診査用ステントを製作し、外科手術用ガイドへの埋入角度の伝達を行う。

- ①本品の構成品、「スキャニングティース※¹」及び「スキャニングレジン※²」を用いてX線診査用ステントを製作する。
- ②X線診査用ステントを用いて診査・診断を行う。
- ③インプラント シュリッテンに模型及びX線診査用ステントを固定する。

- ④模型上のX線診査用ステントからサベヤーへ角度移入を行う。必要に応じて角度変更を行う。
- ⑤これを基に「外科手術用ガイド製作キット※³」を用いて外科手術用ガイドを製作する。

※1 歯科インプラント補綴用器具、23B1X10001A58013

※2 歯科インプラント補綴用器具、23B1X10001A58001

※3 歯科用インプラント手術器具、23B1X10001A58030

【使用上の注意】

1)使用上の注意

- ①取扱説明書を参照の上で使用し、注意・指示事項に従うこと。
- ②取扱説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ③他製品と混用しないこと。

2)重要な基本的注意

- ①本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。
- ②本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水のかからない場所に設置、保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp