

※2022年02月改訂（第3版）


医療機器届出番号：23B1X10001A60007

※2017年09月改訂（第2版、新記載要領に基づく改訂）

機械器具 60 歯科用エンジン  
一般医療機器 歯科技工用電気レーズ（70739000）

## ヤマハチ パワーレーズ 70

### ※【形状・構造及び原理等】

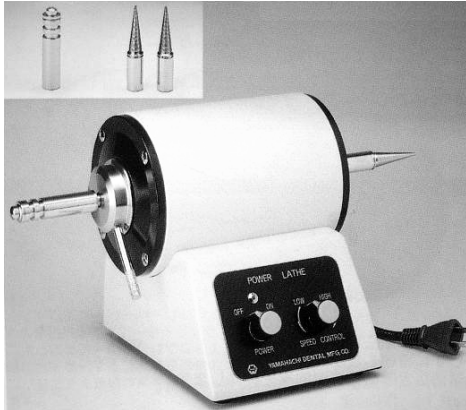

付属品：タケノコ（左右各1本）、ホイールチャック（1本）、コード（1本）

### ※※【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社  
電話番号：0533-57-7121  
FAX番号：0533-57-1764  
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

### ※仕様

電源 AC100V (50/60Hz)  
定格トルク 0.19N・m  
定格出力 140W  
寸法 W360×D210×H200  
回転数 0～7,000rpm  
重量 9.8kg

### 【使用目的又は効果】

電動機を用いて補綴物を研磨する装置である。

### 【使用方法等】

付属品のタケノコを取り付け、研磨工程にあわせて研磨用バフ、ホイール、ブラシ等を装着し、通法に従い歯科技工物、歯科補綴物を研磨する。

### ※※【使用上の注意】

#### 1) 使用上の注意

- ①使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。
- ②研磨を行う際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護メガネ、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ③記載の用途以外には使用しないこと。
- ④使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。

#### 2) 重要な基本的注意

- ①本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。
- ②本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。