


機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用加圧埋没器(70756000)

TK プレッシャーポット

＊【形状・構造及び原理等】

構造：下記写真のとおり。

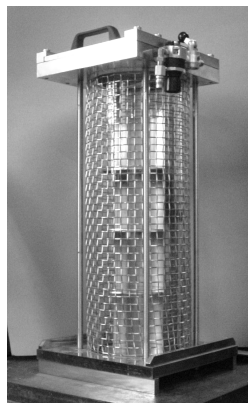

仕様 本体寸法 : W265×D283×H611 mm
重量 : 32kg
最大圧力 : 0.6MPa
内容積 : 0.009m³

【使用目的又は効果】

本品は、ろう型を埋没するために用いる装置で、気泡の発生を抑制する加圧機能を備える。

【使用方法等】

本品の蓋を開け、埋没したフラスコ、リング等を入れしっかりと蓋をした後、切替バルブを操作してエアを注入し、加圧を開始する。所定時間後、切替バルブを操作してエアを開放し、本品内の気圧を下げてから蓋を開け、フラスコ、リング等を取り出す。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①本品を使用の前にはパッキン等、不具合がないことを確認すること。
- ②蓋をしっかりと閉めないまま加圧すると危険です。使用時には必ず蓋の密閉状態を確認してから加圧すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ①本品は記載の用途以外には使用しないこと。
 - ②本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。
 - ②本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX 番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp