

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材（70902000）

ダイヤモンドトリマージスク

＊【形状・構造及び原理等】


1) 成分

- ①軸部及び基材部 ステンレス（SUS304）
②作業部 ダイヤモンド砥粒

＊2) 形状、構造及び寸法

形状：ディスク形状

構造及び寸法：下図のとおり

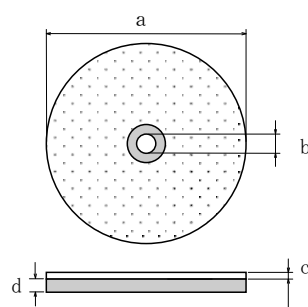

寸法

測定箇所	寸法 (mm)
a	230
b	22
c	1.5
d	5

3) 種類

#60（粗目）、#80（標準）

【使用目的又は効果】

歯科技工用トリマに取り付け、モータで駆動させ顎態模型、平行模型等の石こうを削合する。

【使用方法等】

- 歯科技工用トリマに本品をはめ込む。軸部が19mmの時は、付属の調整リングで調整する。
- 本品と歯科技工用トリマ締付ネジの間に付属のゴムパッキンを挟み込むようにして締付ネジをしめる。
- 歯科技工用トリマのカバーを取り付け、完了

[使用方法に関連する注意]

- 本品を取り付ける際は、がたつき、偏心がないよう取り付けること。
- 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 損傷、変形（サビ、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 使用時には注水を行うこと。
- 石こうの付着による目詰まり防止のため、本品の使用後は十分に洗浄すること。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ①本品を使用する際には、回転数等、歯科技工用トリマの取扱説明書に従って使用すること。
- ②本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp