

2020 年 12 月（第 5 版）
 2020 年 7 月（第 4 版）

歯科材料 02 歯冠材料
 管理医療機器 アクリル系レジン歯 JMDN70807000

ピュア

【禁忌・禁止】


- ・本材又はメタクリレート系モノマーに対して、発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

本品は人の前歯・臼歯を模倣したアクリル系レジン歯の既製人工歯である。

1. 形態

①前歯（単位：mm）

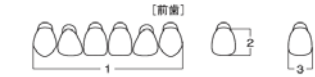

型		6 前歯全幅径 (直線)	中切歯幅径	中切歯長径 (カテを除く)
S1	上顎	41.0	7.5	10.0
	下顎	31.0	4.5	9.0
S2	上顎	44.0	8.0	11.0
	下顎	33.5	5.0	9.5
S3	上顎	47.0	8.5	11.5
	下顎	35.5	5.3	10.0
S4	上顎	49.5	9.0	12.0
	下顎	37.5	5.5	10.5
T1	上顎	41.0	7.5	10.0
	下顎	31.0	4.5	9.0
T2	上顎	44.0	8.0	11.0
	下顎	33.5	5.0	10.0
T3	上顎	46.0	8.5	11.5
	下顎	35.0	5.3	10.5
T4	上顎	49.5	9.0	12.0
	下顎	37.0	5.5	11.0
O1	上顎	41.0	7.5	9.5
	下顎	30.5	4.5	8.0
O2	上顎	44.0	8.0	10.0
	下顎	32.5	4.5	8.5
O3	上顎	47.0	8.5	10.5
	下顎	35.0	5.3	9.5
O4	上顎	48.5	9.0	12.0
	下顎	37.0	5.5	10.0
C1	上顎	40.5	7.5	10.0
	下顎	31.5	4.5	8.5
C2	上顎	43.5	8.0	10.5
	下顎	34.5	5.0	9.5
C3	上顎	46.0	8.5	11.5
	下顎	35.5	5.0	10.5
C4	上顎	49.5	9.0	12.0
	下顎	39.0	6.0	11.0
SS1	上顎	41.0	7.5	9.0
	下顎	32.0	5.0	8.5
SS2	上顎	44.5	8.0	9.5
	下顎	34.0	5.0	9.0
SS3	上顎	47.0	8.5	10.0
	下顎	36.0	5.5	9.5
SS4	上顎	50.5	9.0	11.0
	下顎	39.0	6.0	10.0

・維持孔なし・維持孔付き（R h タイプ）

②臼歯（単位：mm）



型			4歯全幅径 (片側)	第1小臼歯の長幅径 (カテを除く)
S 型	28	上顎	28.0	8.0
		下顎	29.8	7.1
	30	上顎	31.6	8.6
		下顎	32.5	7.6
	32	上顎	32.0	9.2
		下顎	33.4	8.1
α 型	28	上顎	28.0	8.3
		下顎	29.9	8.2
	30	上顎	30.0	9.1
		下顎	32.3	8.5
	32	上顎	32.4	9.4
		下顎	34.2	9.2
	34	上顎	34.2	9.8
		下顎	36.6	9.8

- ・ S 型（ピュア）表示⇒維持孔なし・維持孔付き（R h タイプ）
- ・ α 型（ピュア - α）表示⇒維持孔なし

2. 色調

5 2・5 5・5 6・5 8

- ・前歯の維持孔付き（R h タイプ）は、5 5，5 6，5 8 のみ
- ・臼歯（S 型、α 型）は、5 5，5 6 のみ

3. 性能及び安全性に関する規格

基本要件第 6 条に規定されている JIST 6506 の品質の性能に関する項目について試験を実施した。試験結果は全て適合している。

4. 包装

前歯 ①1 組（6 歯）

②1 箱（6 歯×20 組）

③全形態セット（1 箱：40 組）

④単品補充用 1 箱（1 部位：50 歯）

※単品補充用は、色調 55, 56 のみ、維持孔付きの販売はありません。

臼歯 ①1 組（8 歯）

②1 箱（8 歯×14 組）

③部位別セット 1 箱（20 歯バラ×1 6 部位）

④単品補充用 1 箱（1 部位：50 歯）

【使用目的又は効果】

本品は義歯床用人工歯前歯・臼歯である。

【使用方法等】

1) 通常義歯床用人工歯の使用方法により使用し、義歯床樹脂と結合させて使用する。

①形態修正を行った場合は、その部分を十分に研磨すること。

②アクリル系樹脂以外の床用樹脂材を用いて義歯を作成する場合は接着しないので、維持孔付き（R h タイプ）を使用するか、床用樹脂メーカー指定の方法に従って維持孔の付与等の前処理をすること。

③口腔内において色素沈着（煙草のヤニなど）により着色した場合やブランクが付着した場合は、義歯を取り外し、義歯用はみがき粉及び義歯用ブラシで用いて、よく清掃（研磨除去等）するように患者に指導すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

①他社製品と混用しないこと。

2) 重要な基本的注意

①本品の使用により過敏症を起こした患者には使用を中止し、直ちに医師の診断を受ける又は受けさせること。

②本材又はメタクリレート系モノマーに対して、発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。

③本品は、【使用目的又は効果】の項の用途以外には使用しないこと。

④本品の切削、研磨作業の際には、集塵装置、防塵防護マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。

⑤本品の切削、研磨作業の際には、保護メガネなどを着用すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

・本品は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。

・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

株式会社 クエスト

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷 53-1

TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

【製造業者】

クエスト デンタル マテリアル コーポレーション

QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION

(PHILIPPINES)