

歯科材料 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科用コバルト・クロム合金線 JMDN70789000

コバルトクロム線

*

【警告】

- ・本材に対して発症、皮膚炎等の過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者及び歯科従事者には、使用しないこと

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。

4) 重要な基本的注意

- ①ロウ付作業中の換気に十分注意するとともに、保護メガネを使用して、目の保護をすること。また、作業終了後は速やかに洗面、洗眼うがい等を行いフラックスによる汚染をのぞくこと。
- ②フラックスは歯科用フラックスを使用すること。
- ③歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示されている使用上の注意を守ること。
- ④オーバーヒートは本品の性能が損なわれるため、十分に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・本材は、埃、水分、油分等が付着しない場所で保管、管理すること。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕


株式会社 クエスト
TEL : 0885-38-9777 FAX : 0885-38-9888

〔製造業者〕

有限会社 齋藤歯研工業所
株式会社 クエスト

【形状、構造及び原理等】

形状

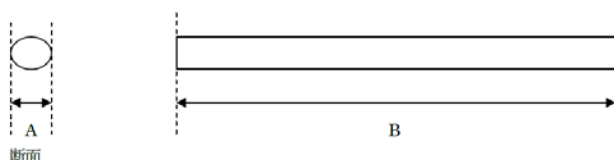

断面

種類	A(直径)mm	B(長さ)cm	質量 (g)
0.8	0.8±0.05	500+20-0	20.5+2.5-0
0.9	0.9±0.05	500+20-0	26.0+3.0-0
1.0	1.0±0.05	500+20-0	32.0+3.5-0

表 1

内容量：5M 巻

【使用目的又は効果】

局部義歯の維持装置として鉤歯表面に適合させ、義歯の維持安定に用いる。

【使用方法等】

*使用方法

- ①必要とする本品の丸線サイズを使用して、プライヤーで屈曲成形させて維持装置のクラスプを作製する。
- ②研磨
通法により研磨して下さい。
- ③硬化熱処理
500℃の炉中におよそ 120 分間入れた後に放冷して下さい。
- ④軟化熱処理
1010～1150℃の炉中でおよそ 10～15 分加熱保持した後、急冷して下さい。

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ①口腔内で本品の削合や研磨を行わない。
- ②本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
- ③本品は記載の使用目的以外には使用しないこと。
- ④本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。