

2020 年 12 月（第 5 版）
2020 年 10 月（第 4 版）

歯科材料 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科用 ステンレス鋼線 JMDN70792000

パラタルバー

【警告】

- ・ニッケルに対して発疹、皮膚炎などの過敏症状の既往歴がある患者には使用しないこと。


【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・再使用の禁止。

- ・歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。
- ・本材は、【使用目的又は効果】に定められた用途以外には使用しないこと。
- ・口腔内で本品の削合や研磨を行わない。
- ・本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

形状：

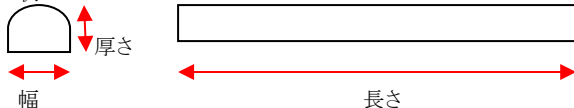

該当規格：JIS T6103（歯科用ステンレス鋼線）

組成：ニッケル：10～14％・クロム：16～18％・

モリブデン：2～3％・マンガン：2％ その他

種類：サイズ表を下記に表す。

サイズ	幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (m)	質量 (g)
小	2.8±0.05	1.30±0.05	0.31 + 0.05 - 0	20.5+3.0-0
中	3.0±0.05	1.4±0.05		23.5+3.5-0
大	3.7±0.05	1.25±0.05		24.5+5.5-0

表1

内容量：大・中・小 サイズは表1のとおり
各サイズ3本入り

4) 重要な基本的注意

- ・本品の切削、研削物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、防塵マスク等を着用の上、作業を行うこと。万が一、研削物等の微粉が目に入った場合は直ちに作業を中止し、直ぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断をうけること。
- ・フラックスは歯科用フラックスを使用すること。
- ・歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示されている使用上の注意事項を守ること。
- ・オーバーヒートは本品の性能が損なわれるため、十分に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・本品は、埃、油分、水分等を付着しない場所で保管、管理すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 クエスト

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷 53-1

TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

〔製造業者〕

有限会社 齋藤歯研工業所

株式会社 クエスト

【使用目的又は効果】

義歯床と義歯床、あるいは義歯床と維持装置などの連結用として上顎に用いる。

【使用方法等】

使用方法

- ①必要とする本品のサイズを使用して、ブライヤーで成形します。
レジン重合部は埃、油分を取り除いてから重合させて下さい。埃、油分が残ると重合後充分な接着が得られません。
- ②研磨
通法により研磨して下さい。
- ③軟化熱処理
1,010～1,150℃の炉の中で加熱処理した後、急冷して下さい。
- ④硬化熱処理
350～450℃の炉の中で20～40分加熱し、その後放冷して下さい。

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・ろう付作業中の換気に十分注意するとともに、保護めがねを使用して目を保護すること。また、作業終了後は速やかに洗面洗顔、うがいなどを行いフラックスによる汚染を除くこと。