

器具機械 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN10201000

シケンオリジナル咬合器Ⅱ


【禁忌・禁止】

- ・ 歯科技工用、技工操作以外に使用しないこと。
- ・ 指定された用途以外には使用しないこと。
- ・ 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
（保守・点検に係る事項参照のこと。）
- ・ 器具の形態変更や改造等行わないこと。
- ・ 器具を落下させないこと。又、強い衝撃を与えないこと。

【使用上の注意】

1. 本品は、医療有資格者以外には使用しないこと。
2. 本品は、歯科技工用、技工操作以外に使用しないこと。
3. 本品を使用する前に必ず器具の使用前点検を行うこと。
4. 破損等の原因になるので二次加工（改造等）を絶対に行わないこと。
5. 本品に無理な角度、過度な加圧を加えての使用は破損等の原因になるので絶対に行わないこと。
6. 腐食（サビ）の原因となるので、洗浄の際は研磨剤、金属ワール、金ブラシを使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

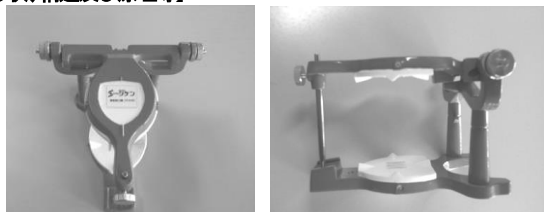

顎頭間距離（mm）	1 0 0 mm
上下顎間距離（mm）	7 5 mm
矢状顎路傾斜角（°）	1 0°
側方切歯路傾斜角（°）	1 0°
重量（g）本体のみ	4 5 0 g

（本体部分）

本体：アルミダイキャスト
ピン（インサイザルピン）：ステンレス
上下顎プレート：プラスチック、磁石、ウレタン

（付属品）

スチール板：スチール製
咬合平面板：スチール製

（別売）

インサイザルテーブル

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

1. 本品は医療従事者が適切に保管・管理すること。
2. 本品を保管する場所は、高温多湿を避け、塵やホコリのない清潔な場所に保管すること。
3. 腐食（サビ）を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
化学薬品及び材質の異なる器具と一緒にすると電気分解を要因とした錆が発生する可能性があるので一緒に保管しない。
4. 本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いをしないこと。
5. 本品に付着した石膏等は使用後、速やかに洗浄除去すること。

【包装】

1 台/1 箱

付属品：スチール板(10 枚)、咬合平面板(1 枚)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1
TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者


QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION
(PHILIPPINES)

【使用目的又は効果】

補綴物の作製及び診断に使用し、患者の咬合機能を再現する咬合器である。

【使用方法等】

技工操作時の補綴物の操作時、下顎運動の一部又は咬合を再現するために用いる。模型脱着は、上下顎プレートの磁石部にスチール板を載せて、歯科技工用焼石こう等で模型を装着する。

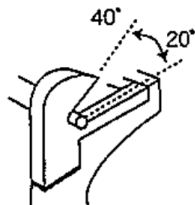

上図（参照）

側方運動時に顎路角プレートの下辺を滑走させると、
20 度の傾斜角で運動し、上辺を滑走させると、40 度の傾斜角で運動します。