

2020 年 11 月（第 2 版）
2020 年 4 月（第 1 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

フェルトファイバーホイール

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・無理な角度や過度の加圧はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者


- ・株式会社 クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷 53-1
TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者

- ・K I テック株式会社
・株式会社 クエスト

【形状、構造及び原理等】

形 状：下記画像のように円盤状の形状である。

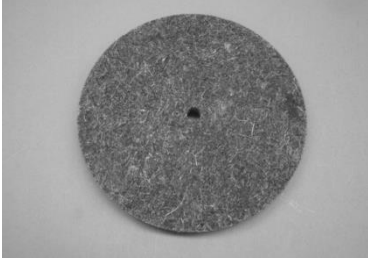

寸 法

直径：98.0mm ±5.0mm
内径：8.0mm ±0.5mm
厚さ：8.0mm ±2.0mm

主成分：・ヤギ毛を主体とする獣毛
・アクリル系樹脂

梱包： 1 枚／袋

【使用目的又は効果】

主に歯科補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用電気レーズ等に装着し、回転させ、専用ルージュを塗布し、断続的に被研削物（補綴物等）に軽く押しつけて研磨する。

【使用上の注意】

1) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

2) 使用注意

- ・本品を歯科技工用電気レーズ等に取り付ける際は、メーカーの指示に従って、しっかり取り付けて下さい。
- ・無理な角度、過度の加圧での使用は、破損、変形をまねくので避けること。
- ・研削物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、防塵マスク等を着用の上、作業を行うこと。万が一、研削物等の微粉が目に入った場合は直ちに作業を中止し、直ぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断をうけること。
- ・本品は、その他の歯科用研削材及び研磨材の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・保管は、直射日光、高温の場所を避けて保管する。
- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。