

PSM ドライバー

【形状・構造及び原理等】

非滅菌



10-61000 スクリュードライバーハンドル



33-18230 ドライバー用先端 Tip ロング



33-18236 インストルメント用つまみねじ




33-18234 つまみねじドライバー#33-18236 用先端



33-18266 デンタルマンドレル用つまみねじ




33-18232 コントラアングルハンドピース用先端 Tip 23mm

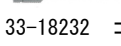


33-18237 コントラアングルハンドピース用先端 Tip 33mm



33-54512 ハンドピース用 Tip 20mm

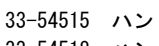

33-54515 ハンドピース用 Tip 30mm

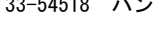

33-54518 ハンドピース用 Tip 50mm



33-18244 コントラ先端 拡張+16mm



33-18288 ラボラトリーフィンガースクリュードライバー、固定



33-54519 BENEFit アクティベータースクリュードライバー



33-54520 多目的ハンドル



10-63025 手動回転コントラ用ハンドル

33-54704 手動回転トルク調整付
コントラ用ハンドル33-18010 スクリューホルダー
クアトロミニ ロング33-18003 スクリューホルダー
クアトロミニ ショート

ドリルガイド 33-54570 33-54576 33-54577



スクリューガイド 33-54571 33-54578 33-54579



モビルホルダー 33-18290

【使用目的又は効果】

外科的歯科矯正治療時に使用する手術器具。

【使用方法等】

1. 使用する前に滅菌が完了しているか確認して下さい。
2. ハンドルに先端を装着し使用する。
3. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌して下さい。
 - 1) 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
 - 2) 洗浄液から取出して水洗いし、血液、組織などを完全に取り除き、消毒液に浸漬します。
 - 3) 消毒液から取り出して水洗いし、十分に水切りして下さい。
 - 4) 滅菌バックに入れ、130℃で 15 分間オートブレイブなどで滅菌して下さい。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 1) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
 - 2) 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
 - 3) 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
 - 4) 強アルカリ、弱酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。
2. 重要な基本的注意
 - 1) 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
 - 2) 本品に無理な力を加えないこと。無理な力を加えて破損が生じた場合には使用しないこと。

- 3) 本品に変形変質等の異常がある場合には、使用せず弊社までご連絡ください。
- 4) 本品を廃棄する場合「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切な処理をしてください。

【保管方法及び使用期限等】

滅菌処理後は埃、水分等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：安永コンピュータシステム株式会社

第一種医療機器製造販売業

電話番号：0776-33-5333 FAX 番号：0776-33-5334

* 製造業者：PSM Medical GmbH（ドイツ）