


器具器械 5 8 整形用器具器械
一般医療機器 ドライバ及び抜出器 JMDN:11345000
H レスキューツールキット

【禁忌・禁止】

1. 本品は未滅菌ですので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3. 本品の加工、改造等は絶対行わないこと。
4. 錆の発生がみられるものは、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

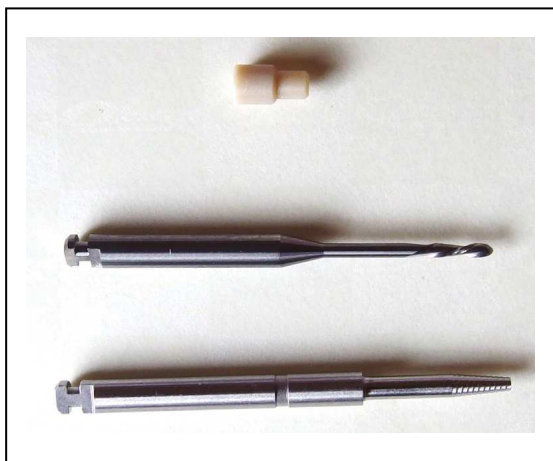

PEEK ガイド
除去バー（反時計回転用）
エンドミルバー（反時計回転用）

- ・ 原材料：ステンレス鋼、タングステンカーバイト
PEEK 樹脂

【使用目的又は効果】

インプラントフィクチャー内でスクリューの破損が発生した際、これを取り除く時に使用する＊

- ・ 外科手術時にピン・ネジ又は器具を挿入又は除去する場合に組み合わせて用いる手術器具。（再使用可能）

【使用方法等】

1. 滅菌の確認（オートクレーブ 121～124℃15 分）
2. 使用にあたり、滅菌済みのゴム手袋を使用すること。
3. エンドミルバーのハンドピースの取り付けは、確実に奥まで差し込むこと。

4. 本品は、使用前に口腔外にて反時計回転させ、芯振れ・注水など支障の無いことを確認する。
5. エンドミルバーの推奨回転数は、rpm 800 以上で使用する。
（破折スクリューネジに反時計回転で約 1 mm 以上穿孔する）
6. 除去バーが孔に食い込んでいることを確認してから行う。（反時計回転）
7. 破損スクリューネジと除去バーが一体化してから除去する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. 本品の使用に際しては、必要な知識及び技術を修得したのち、使用すること。
2. エンドミルバーの破損を防ぐためガイドに挿入後、過度な力を加えず慎重に破折スクリューネジに穿孔する。
3. 除去手順
 - ①エンゲージングに PEEK ガイドを挿入する。
 - ②インプラントフィクチャーにエンゲージングを取り付ける。
 - ③エンドミルバーを無回転で PEEK ガイドに挿入する。
 - ④反時計回転で慎重に穿孔する（約 1 mm 以上）
 - ⑤エンゲージング及び PEEK ガイドをインプラントフィクチャーから取り外す。
 - ⑥除去バーを穿孔された孔に反時計回転し食い付けさせ、反時計回転しながら除去する。

【保管方法及び使用期間等】

1. 本品は、汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度の低い場所にて保管すること。
2. 本品は、医科及び歯科の従事者以外が触れないように適切に保管する。

【保守・点検に係る事項】

1. 消毒用薬液、洗浄剤の濃度・浸せき時間・温度など使用方法は、各メーカーの指示に従い正しく使用すること。
2. 錆への影響が強い消毒用薬液は、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：光研

〒994-0057 山形県天童市石鳥居 2 丁目 1-101

TEL 023-655-4522

製造業者：光研