

機械器具 (48) 注射筒
一般医療機器 血管造影用注射筒 15286000

エアータイト


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び各部の名称

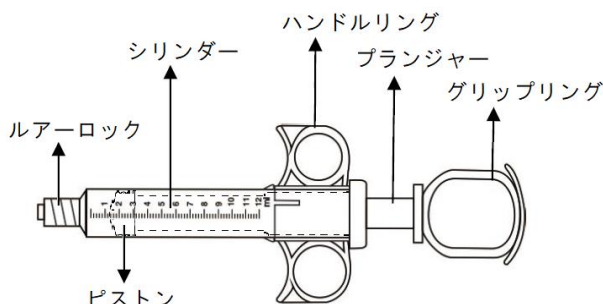

型 番	SM-CS-10FRR-TB
サイズ(容量)	10mL
ルアーロック	オスルアー (ISO 80369-7)

2. 原材料

シリンダー： ポリカーボネート

ピストン： シリコンゴム

潤滑剤： シリコンオイル

3. 原理

グリップリングに指をかけてプランジャーを引き、シリンダー内に注入液を吸引する。オスルアーにカテーテル等を接続し、プランジャーを押し込むことで注入液が放出される。

【使用目的又は効果】

心臓及び脈管を X 線写真で検査するため、造影剤等を心臓、大血管及び冠動脈に注射（注入）する針又はカテーテルと接続して用いる。本品は筒及びプランジャーから構成される。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 必要な量の造影剤又は生理食塩水を吸引し、シリンジ内の空気を除去する。
2. オスルアーにカテーテル等の注入用器具を接続する。
3. 血管造影の手技に応じて、本品のプランジャーを押し込み注入する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 使用前に製品のシリンダー内部に異常な量の潤滑剤がないか、確認すること。異常が認められた場合は使用しないこと。

2. 使用前にプランジャーを前後に動かし、ピストンがプランジャーから外れないことを確認すること。異常が認められた場合は使用しないこと。
3. 注入器具と接続する際は過度な締め付けをしないこと。[破損の恐れがある。]
4. 接続部に薬液等を付着させないこと。[正しく接続できない可能性がある。]
5. 接続部に緩みや、漏れ等の異常がないことを確認すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品はポリカーボネートを使用している。脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を使用する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ひび割れに注意すること。[薬液によりひび割れが生じ、薬液漏れ及び空気混入等のおそれがある。]
2. 廃棄する場合は、地域の法規制及び施設の規則に従うこと。
3. 感染性廃棄物に該当するかについては、使用の状態により判断すること。

＜不具合・有害事象＞

1. その他の不具合
包装の破れ、破損、液漏れ、接合部の緩み・外れ
2. その他の有害事象
感染、空気の混入

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温、多湿、直射日光、水濡れ及び衝撃等を避けて保管すること。

＜有効期間＞

包装ラベルに使用期限を表示している。(自己認証により設定)

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

山科精密株式会社

電話番号：077-558-2350

〒520-3001 滋賀県栗東市東坂 525 番地

外国製造業者

Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd.

中華人民共和国