

添付文書

2025 年 12 月（第 1 版）

医療機器届出番号：27B2X00256YC3933

類別：医（04）整形用品 その他の家庭用医療機器
一般医療機器 71105001（JMDN コード） 家庭用遠赤外線血行促進用衣

メディカルシンセンサーⅢ

【警告】

適用対象（次の患者へ適用する際には、特に注意すること）

- 装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある方。〔接触により症状が悪化するおそれがあるため。〕
- 繊維に対して過敏症のある方。〔接触性皮膚炎を起こす恐れがあるため。〕

【禁忌・禁止】

クロロプレンラバーを使用した製品に対するアレルギーがある方。〔アレルギー症状を引き起こすおそれがあるため。〕


【形状・構造及び原理等】

- 構成
ロングスリーブ



ロングパンツ

ハーフパンツ

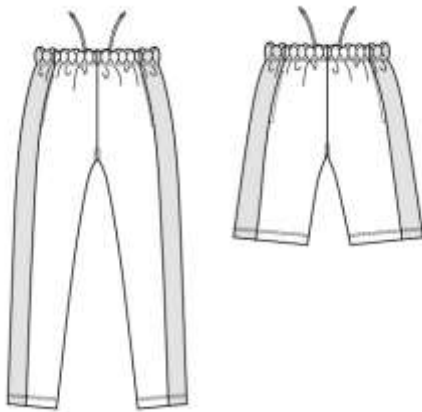

- 適用範囲（単位：cm）

サイズ	身長	バスト	ウエスト	ヒップ
S	155～165	81～87	70～76	83～89
M	165～175	87～93	75～81	87～93
L	170～180	91～97	79～85	91～97
XL	175～185	95～101	83～89	95～101
2XL	180～190	99～105	87～93	99～105

寸法（単位：cm）

サイズ	ロングスリーブ		
	着丈	バスト巾	裾丈
S	64.0	48.0	75.5
M	66.0	52.0	78.5
L	67.5	54.0	80.5
XL	70.0	57.5	84.0
2XL	71.0	60.5	87.0

サイズ	ロングパンツ		ハーフパンツ	
	股下	足口	股下	足口
S	68.0	15.0	22.5	26.0
M	69.5	16.0	23.5	27.0
L	71.0	16.0	24.5	28.0
XL	74.0	16.5	25.5	29.0
2XL	75.5	17.5	26.5	30.0

- 原材料
クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

- 原理
本品は、生地には特殊な加工を施し一定程度の遠赤外線を輻射する素材を使用した製品であり、着用することで遠赤外線による血行促進効果をもたらす。

- 【使用目的又は効果】
遠赤外線による血行促進効果により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

- 【使用方法等】
詳細は取扱説明書を必ず参照すること。

- 適用範囲よりサイズの選定
(1) サイズ表よりロングスリーブ（長袖シャツ）とパンツのサイズを選定してください。
(2) 本品は再使用可能です。

- 装着方法
(1) 一般的な衣類と同様に着用してください。
(2) インナーの上に着用してください。
(3) 必要に応じて、ウエストの紐を使用してください。

- 【使用上の注意】
1. 使用注意（次の方には慎重に適用すること）
(1) 本品の使用により、痛みやかゆみ、しびれ、装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は使用を中止してください。〔症状を悪化させるおそれがあるため〕
(2) 自分自身で着脱できない方は、介助等でいつでも使用を中止できる状態でご使用ください。〔異常等が発生したときに使用を中止できるようにするため〕

取扱説明書を必ずご参照ください

2. 重要な基本的注意

- (1) 本品を折り返して使用しないでください。
- (2) 体型に変化があった場合は、適切なサイズに変更してください。
- (3) 本品は個人用の製品のため、衛生上の観点から、他者への譲渡、貸与は行わないでください。
- (4) 他の衣類と重ね着する場合は、汗をかきすぎないように注意してください。
- (5) 本品のほかに医療機器等を重ねて装着しないでください。
- (6) 商品表面の繊維が剥がれてラバーが直接皮膚にあたる場合は使用しないでください。
- (7) ファスナーが破損した場合は使用しないでください。

3. 取り扱い上の注意

- (1) 次のような場合には破損（ほつれ、破れ等）する場合がありますので注意してください。
 - ① 強く引っ張っての装着
 - ② 肌荒れした手や伸びた爪での取り扱い
 - ③ 鋭利なものへの接触
- (2) 本品の形状を変えたりするなど、加工、修理を行わないでください。
- (3) ファスナーの開閉時の噛み込みに注意してください。
- (4) 本品は、素材の特性上シワが発生する場合があります。
- (5) 商品についているタグは切らないでください。
- (6) 製品の匂いが気になる場合は洗濯してから使用開始してください。
- (7) 他の製品と一緒に洗濯すると色移りする可能性があります。

【保管方法及び耐用期間等】

1. 保管方法

高温・多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管してください。

2. 耐用期間 2年

【保守・点検に係る事項】

1. 本品は重ねて保管するとシワがつきやすいためハンガー等につるして保管してください。(シワによる本製品の機能への影響はありません。)

2. 洗濯上の注意

- (1) 洗濯はぬるま湯で中性洗剤を使用し、手洗い（押し洗い）してください。
- (2) 洗濯する時はファスナーを閉じてください。
- (3) タオル等に挟んで軽く水気を取り、直射日光を避け、陰干しして十分に乾燥させてください。
- (4) 繊維の劣化を避けるため、熱湯、塩素系漂白剤、柔軟剤、消毒剤、乾燥機、ドライヤー、アイロンの使用及びドライクリーニングは避けてください。

【包装】

1セット/1袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者 山本化学工業株式会社
〒544-0005 大阪府大阪市生野区中川5丁目13番11号

連絡先 山本化学工業株式会社

TEL 0120-81-6134

〒544-0005 大阪府大阪市生野区中川5丁目13番11号
受付時間 8時30分～16時30分（土・日・祝日を除く）