

添付文書

LumièreTM
ルミエ・パッチ

器具機械 22 検眼用器具 検眼用品
一般医療機器 フレスネルレンズ
JMDN コード：32693000
医療機器届出番号：04B3X10008000031
2019年6月10日（第1版）

！
使用上の注意

重要な基本的注意

- (1) 眼や皮膚に直接貼って使用しないで下さい。
- (2) 医師、視能訓練士の指示に従って使用して下さい。
- (3) 本品の使用中は視力が低下するので、次のことは行わないで下さい。
● 転倒の恐れがある場所での歩行 ● 機械・道具・乗物類の操作
- (4) 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督の下で行って下さい。

その他の注意

- (1) 個装が破れたり、開けられたものは使用しないで下さい。
- (2) 引き延ばされたり、穴・キズが出来たフィルムは使用しないで下さい。
- (3) 使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
- (4) 使用後は眼鏡に貼ったままにせず、台紙に貼って保管してください。

相談すること

- (1) 本品の使用により、眼に異常を感じた場合は医師の診察を受けて下さい。
- (2) 症状が良くならない場合には医師の診察を受けて下さい。

【形状・構造及び原理等】


<形状及び構造>

再剥離可能な粘着剤が付いたフィルムです（右図）。

- ・再剥離粘着剤付きフィルム（裏面：台紙）
- ・レンズに沿ってカットするためのピック（付属品）

<原理>

PVC フィルムにスリガラス加工を施すことで光を拡散します。

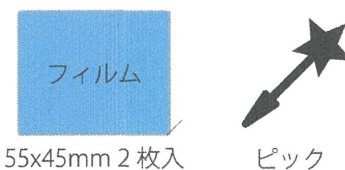

！ 小児がピックを誤飲しないよう、ご注意ください。

！ ピックの先でケガをしないよう、ご注意ください。


【使用目的又は効果】

眼鏡のレンズ表面に貼ることで、片眼の遮閉効果を得られます。

【使用方法等】


- ① フィルムを台紙から剥がし、遮閉する側のレンズの表面に貼り付けます。

- ② ピックの先をレンズの外周部に当てて、グルグルとまんべんなく擦って下さい。終わったらフィルムを剥がして下さい。

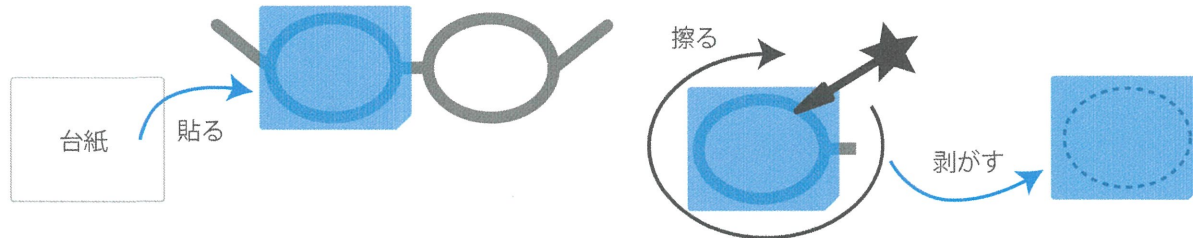

- ③ フィルムにはレンズの形に痕がついてます。痕に沿ってハサミでカットして下さい。

- ④ レンズに貼り付けて使用します。
※使用後は台紙に貼って保管して下さい。

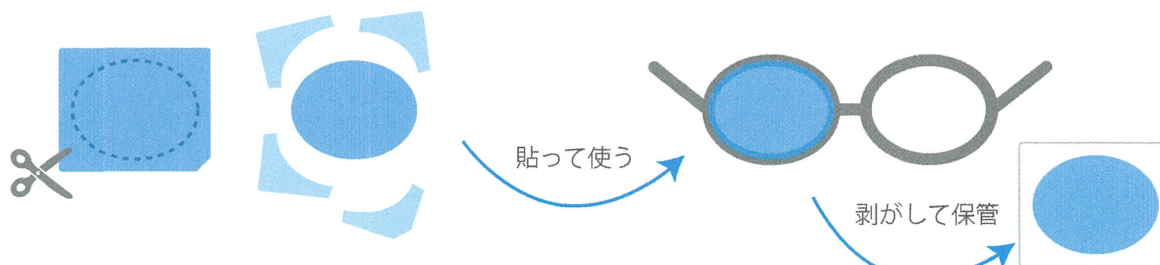

【保存方法及び有効期間等】

- ・使用後は眼鏡レンズに貼ったままにせず、必ず台紙に貼って保管して下さい。
※眼鏡レンズに長期間貼ったままにすると剥がれにくくなる場合があります。
- ・有効期間は外箱に印字されています。

【保守・点検に係る事項】

- ・フィルムが汚れた場合は水道水で洗い、良く乾かしてから台紙に貼って保管して下さい。
※濡れた状態で貼り付けると、再剥離しにくくなる場合があります。
- ・汚れがひどい場合は食器洗い用の中性洗剤をかけ、水を流しながら指で軽く洗浄して下さい。
※アルコールや有機溶剤はフィルムを溶かすことがあるため、使用しないで下さい。
- ・フィルムの粘着面を布・ティッシュ・紙などで拭かないで下さい。
※繊維が粘着面に付着し、洗っても取れなくなります。
- ・廃棄する場合は、自治体の区分に従って処理してください。

【製造販売業者及び製造業者の名称等】

<製造販売業者>

ヤグチ電子工業株式会社

〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門 301

Tel. 0225-75-2106 / Fax. 0225-75-2071 / info@yaguchidenshi.jp

<発売元>



株式
会社

株式会社 リッツメディカル

〒441-0105 愛知県豊川市伊奈町新屋 279

Tel. 0533-72-5210 / Fax. 0533-78-3120 / info@ritz-med.co.jp

無償交換について

万が一うまくカットできなかった場合は、ご購入から二週間以内に限り、新品のフィルムと交換いたします。次の3点を郵送して下さい。

- ① 購入時のレシート原本（購入日がわかるもの）
- ② 切り損じのフィルム一式
- ③ 返送用封筒（住所をお書きの上、送料分の切手をお貼り下さい）

送り先

〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門 301

ヤグチ電子工業株式会社 ルミエパッチ交換係

※交換は一度までとさせていただきます。