

機械器具 25 医療用鏡

一般医療機器 内視鏡固定具 37090030

オクトパス 鏡視下手術用アダプター

【禁忌・禁止】＊


1. 併用医療機器＊

- (1) 本品は、販売名「オクトパス リトラクターホルダー」
(製造販売届出番号：13B1X00249MB0004、製造販売業者：ユフ精器株式会社)に適合するように設計されている。他の開創器との併用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】＊


1. 形状

- (1) オクトパス ラパロ・鉗子用止め金具

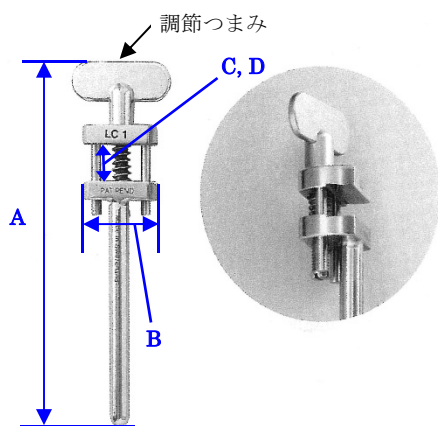

商品コード	全長 (開時) A(mm)	把持部の幅 B(mm)	把持部の縦	
			閉時 C(mm)	開時 D(mm)
OCT-LC01	140.0	30.0	0.0	17.0

- (2) オクトパス ラパロ・トラカール用止め金具

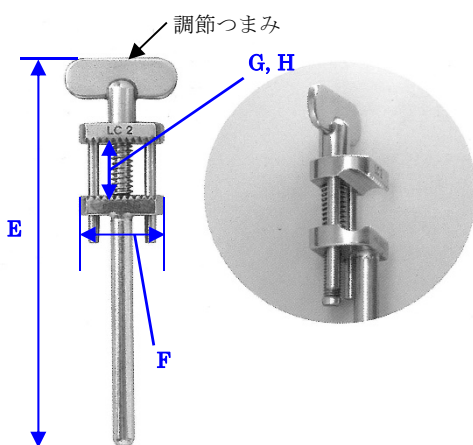

商品コード	全長 (開時) E(mm)	把持部の幅 F(mm)	把持部の縦	
			閉時 G(mm)	開時 H(mm)
OCT-LC02	150.0	30.0	16.0	30.0

2. 動作原理＊

手術時に販売名「オクトパス リトラクターホルダー」
(製造販売届出番号：13B1X00249MB0004、製造販売業者：ユフ精器株式会社)の各種開創器に装着し、腹腔鏡、又は各種内視鏡、処置具を意図する位置に保持又は調整する。

【使用目的又は効果】＊

手術時に販売名「オクトパス リトラクターホルダー」(製造販売届出番号：13B1X00249MB0004、製造販売業者：ユフ精器株式会社)の各種開創器に装着して腹腔鏡、又は各種内視鏡、処置具を意図する位置に保持するために用いる。

【使用方法等】＊

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作＊

- (1) 販売名「オクトパス リトラクターホルダー」(製造販売届出番号：13B1X00249MB0004、製造販売業者：ユフ精器株式会社)の各種開創器に本品の柄の部分を取り付ける。
(2) 把持部に内視鏡、処置具などを挟む。
(3) 調整つまみを回して内視鏡、処置具を固定する。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】1に示したように洗浄、滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
(2) 使用前に、破損・変形・亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうか点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
(3) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
(4) 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、表面が破損するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 水洗いし、付着物を取り除く。
(2) 石鹼又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。

- (3) 蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- (4) 高圧蒸気滅菌、又はEOG滅菌にて滅菌する。
- 例) 滅菌推奨条件

滅菌法	温度	時間	
		滅菌バッグ	滅菌コンテナ
高圧蒸気滅菌 (プレバキューム)	132℃～135℃	4 分	4 分
	121℃～123℃	15～30 分	40 分
高圧蒸気滅菌 (グラビティ)	132℃～135℃	10～25 分	30 分
EOG 滅菌	52℃～54℃	105 分 (12%EO－88% フロン)エアレー ション 6 時間	

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727

外国製造業者

メドノスプロ ゲーエムベーハー (スイス)

MEDNOSBRO GmbH (Switzerland)