


機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 10861001
松本式グリップ鉗子

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

(1) 松本式グリップ鉗子

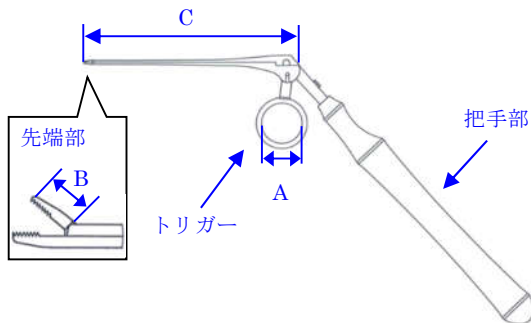

MG-700-05M

商品コード	規格	トリガーの内径 A (mm)	先端部の長さ B (mm)	長さ C (mm)
MG-700-05M	M	15.0	3.0	80.0
MG-700-05S	S	13.0		

2. 原材料（接触部の組成）

ステンレス

3. 動作原理

把手部を持ち、トリガーを操作して先端部を動かし、身体組織などの把持等を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、身体組織を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具である。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) 把手部を持ち、トリガーを操作して先端部を動かし、目的とする物体を把持、結合、圧迫又は支持する。
- (2) 操作する手の力を弱め、先端部を開き、挟んでいた物体を放す。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】1. に示すように洗浄・滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- (2) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・摩耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。

- (3) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
- (4) 使用時に、破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。
- (5) 感電を防ぐため、電気メス等の電気手術器との接触を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 水洗いし、付着物を取り除く。
- (2) 石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- (3) 蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- (4) 高圧蒸気滅菌、又はEOG滅菌にて滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20 分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727