


機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 伸延器 11291000

新井式緊張弓

【形状・構造及び原理等】＊

1. 形状及び寸法＊

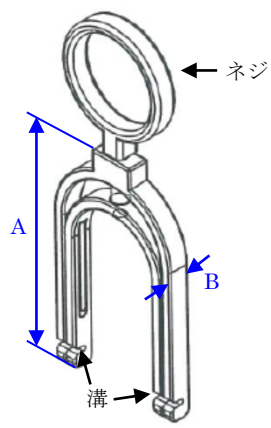

商品名	商品コード	本体の長さ A (mm)	本体の厚さ B (mm)
新井式緊張弓	JYF0400-01	65.5	6.0

2. 動作原理

骨に刺入した鋼線を本品下部の溝に挿入し、ネジを締めて本品を固定・牽引することで、骨折又は脱臼して短縮した骨同士を引き離し、骨や関節の形態を整復保持し、外科手術の実施を可能にする。

【使用目的又は効果】

本品は、接合面を引き離してその位置を保持し、外科手術の実施を可能にするために用いる外科用器具である。通常、鋼線で骨に接続する。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) 患指の骨にキルシュナー鋼線を貫通させたのち、本品下部の溝にキルシュナー鋼線を差し込む。
- (2) 本品上部のネジを締め、キルシュナー鋼線を固定する。
- (3) ネジ部を利用して患指を牽引する。

3. 使用後

- (1) 本品上部のネジを緩め、キルシュナー鋼線を本品下部の溝から外す。
- (2) 患指の骨からキルシュナー鋼線を引き抜く。
- (3) 【保守・点検に係る事項】1 に示すように洗浄、滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- (2) 本品の使用前に、変形・傷がないか及び不具合を確認の上使用すること。不具合を発見した場合には使用しないこと。
- (3) 破損、曲がり等の原因となり得るので、使用時には必

要以上の力を加えないこと。

- (4) 使用時に破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。
- (5) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 水洗いし、付着物を取り除く。
 - (2) 石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
 - (3) 蒸留水又は脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
 - (4) 高压蒸気滅菌にて滅菌する。
- 例) 高压蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20 分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

- (1) 本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。
- (2) 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないよう直ちに洗浄すること。
- (3) 可動部の動きをスムーズにするために、水性潤滑防錆剤を塗布することを推奨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社
〒113-0034
東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号
TEL : 03-3811-1131
FAX : 03-3811-1727