

機械器具 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 送水吸引チューブ 70355000

イリゲーション管

【禁忌・禁止】


1. 併用医療機器

他社製品（指定製品以外）との併用（「相互作用」の項参照）


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

（1）ピエンエアーイリゲーション管

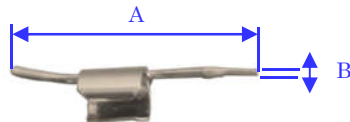


商品コード	規格	全長 A(mm)	先端部 の幅 B(mm)
IR-BA-S	PM2 80K-70mm 用	32.0	1.0
IR-BA-M	PM2 80K-95mm 用	57.0	1.0

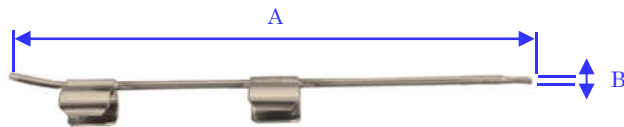

商品コード	規格	全長 A(mm)	先端部 の幅 B(mm)
IR-BA-L	PM2 80K-125mm 用	87.0	1.0
IR-BA-XL	PM2 80K-150mm 用	113.0	1.0


（2）イリゲーション管

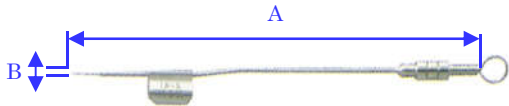


商品コード	規格	全長 A(mm)	先端部 の幅 B(mm)
IR-ST	ショートアタッチメント用 テーパー型	90.0	1.0




商品コード	規格	全長 A(mm)	先端部 の幅 B(mm)
IR-MT	ミディアムアタッチメント用 テーパー型	120.0	1.0

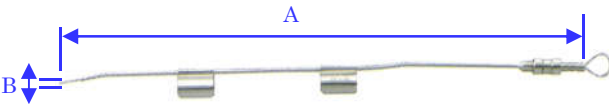

商品コード	規格	全長 A(mm)	先端部 の幅 B(mm)
IR-LT	ロングアタッチメント用 テーパー型	145.0	1.0

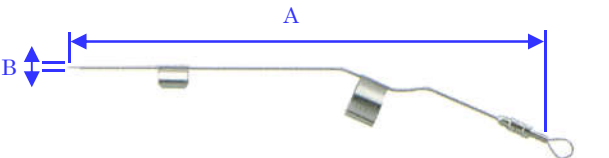

商品コード	規格	全長 A(mm)	先端部 の幅 B(mm)
IR-QD8T	アングルアタッチメント 8cm 用テーパー型	165.0	1.0

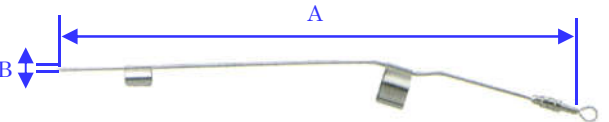

商品コード	規格	全長 A(mm)	先端部 の幅 B(mm)
IR-QD11T	アングルアタッチメント 11cm 用テーパー型	202.0	1.0

2. 原材料

ステンレス鋼

3. 動作原理

骨手術において、注水回路に接続し、先端部から患者の身体処置部へ注水・洗浄を行う。

取扱説明書を必ず参照すること

【使用目的又は効果】

本品は、注水回路に接続し、冷却、洗浄等を目的として術中患者の身体処置部へ持続的に特定の液体を灌流するために用いる。

【使用方法等】**1. 使用前の確認**

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) 本品を使用する手術用ドリルアタッチメントに取り付ける。
- (2) イリゲーションチューブと本品を接続する。
- (3) イリゲーションチューブを送水装置に取り付け、滅菌済みの生理食塩液バッグに接続する。
- (4) 送水装置を稼働させ、生理食塩液を本品の先端より排出させる。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】1 に示すように洗浄、滅菌する。

【使用上の注意】**1. 重要な基本的注意**

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- (2) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 破損、変形等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
- (4) 使用時に破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。
- (5) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、表面が破損するので使用しないこと。
- (6) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- (7) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

2. 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

- (1) 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の 名称等	臨床症状 措置方法	機序・危険因子
他社製品（指定 製品以外）	不具合による危険 性が高まるおそれ がある。	仕様に適合しないた め、正しく接続でき ないかつ異常動作が 発生する。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】**1. 洗浄・滅菌方法**

- (1) 水洗いし、付着物を取り除く。
- (2) 石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- (3) 蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。
- (4) 高圧蒸気滅菌、又はE O G滅菌にて滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20 分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727