


機械器具 4 9 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器

一般医療機器 再使用可能な皮下導通用トンネラ 35950001

デシヤン

【形状・構造及び原理等】＊，＊ ＊

1. 形状＊

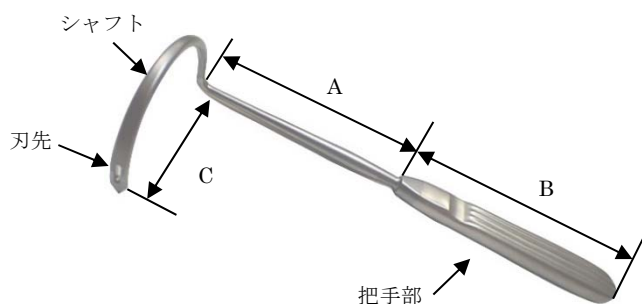

K-IJ-12L

商品コード	彎曲方向	シャフト直線部の長さ A(mm)	把手部の長さ B(mm)	シャフト彎曲部の内径 C(mm)
K-IJ-11R	右回り	85.0	113.0	50.0
K-IJ-12L	左回り	85.0	113.0	50.0

2. 原材料（接触部の組成）

ステンレス鋼

3. 動作原理＊ ＊

あらかじめ作製した 2 つの開口部の一方に本品の先端を当てて、他方の開口部に向かって皮下を弓型に貫通させる。その後、本品の孔に紐状又は管状の植込み型器具を通し、組織から抜きながら、植込み器具を誘導させる。

【使用目的又は効果】

植込み型器具を、円弧状に皮下で導通させるために、トンネルを作製する器具。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) 処置部の 2 箇所に、メスで開口部を作る。
- (2) 刃先を一つの開口部に挿入する。
- (3) 他方の開口部に向かって、把手部を軸に彎曲方向へ回転させ、組織に貫通させ、トンネルを作製する。
- (4) 本品を組織に貫通させた状態で、本品の孔に紐状又は管状の植込み器具を通す。
- (5) 植込み器具を誘導しながら、挿入した方向へ逆回転させ、処置部から本品を抜き、植込み型器具を作製したトンネルに通す。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】 1 に示したように洗浄、滅菌する。

【使用上の注意】

1. 本品は未滅菌品であるため、高圧蒸気滅菌、E O G 滅菌等適切な滅菌を行い、必ず滅菌されたことを確認してから使用すること。
2. 使用時に必要以上の力（応力）を加えると、故障、曲がり、汚損等の原因となるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 処置後、付着物を水洗いで除去し、石鹼又は医療用中性洗剤等を用いて、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
 - (2) 高圧蒸気滅菌、又は E O G 滅菌により滅菌する。
- 例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20 分以上	98.067kPa

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727