

機械器具 53 医療用消息子

一般医療機器 手術用消息子 32870001

ユフ痔瘻用消息子

再使用禁止

【警告】

1. 使用方法

- (1) 本品の付属品である痔瘻用ゴム紐は、天然ゴムを使用しているため、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。
 このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- (2) 天然ゴムと接触する機会の多い患者及び医療関係者は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては十分に注意すること。

【禁忌・禁止】**

1. 適用対象（次の場合には使用しないこと）

- (1) 過去にアナフィラキシー症状様の経験がある患者及び医療関係者には使用しないこと。

2. 使用方法**

- (1) 痔瘻用ゴム紐は再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】*



1. 形状・種類

(1) クリプトフック

①クリプトフック



先端の形状

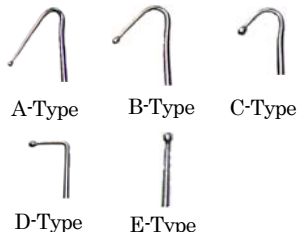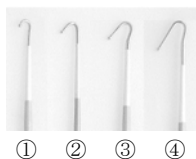

商品コード	先端の形状	屈曲可否	把持部 A(mm)	有効長 B(mm)
KK-201	①	可	90.0	95.0
KK-202	②			
KK-203	③			
KK-204	④			
KK-301	①	否	57.0	101.0
KK-302	②			
KK-303	③			
KK-304	④			
HL-521-A	A-Type			88.0
HL-521-B	B-Type			95.0
HL-521-C	C-Type			101.0
HL-521-D	D-Type			108.0
HL-521-E	E-Type			108.0


②両頭クリプトフック




商品コード	先端の形状	屈曲可否	把持部 A (mm)	有効長 B (mm)
HL-520-A	玉無し	否	57.0	54.0
HL-520-B	玉付き			

(2) ゾンデ*

先端の形状

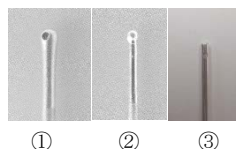


商品コード	先端の形状	把持部 A (mm)	屈曲部 B (mm)
KK-401	① (穴あり)	90	140
KK-402	② (穴なし)		
KK-411	① (穴あり)		

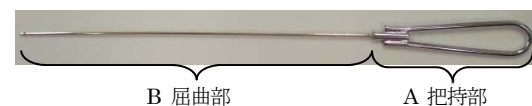

商品コード	先端の形状	把持部 A (mm)	屈曲部 B (mm)
HL-646	③ (側穴あり)	53	120

(3) 付属品

・痔瘻用ゴム紐

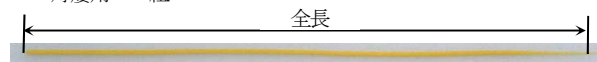

商品コード	タイプ	全長 (mm)
KK-A50	軟	248
KK-A51	硬	238

※本品は、単品又は組み合わせて販売される。

※痔瘻用ゴム紐は単回使用である。

2. 原材料（接触部の組成）

ステンレス鋼、銀、天然ゴム

3. 動作原理

把持部を直接把持し、先端を患部に当てて痔瘻を探索する。

【使用目的又は効果】

本品は痔瘻の原発口及び瘻管の探査をするための器具である。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- (1) 医師の直接把持により、原発口や瘻管の位置を確認、探査する。
- (2) 銀製の部分は必要に応じて角度を自由に変えることが可能である。

3. 使用後

痔瘻用ゴム紐は単回使用であるため、廃棄する。その他は【保守・点検に係る事項】1に示したように、洗浄・滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるので、E O G滅菌又はオートクレーブ滅菌等必ず適切な滅菌を施し、滅菌されたことを確認してから使用すること。滅菌は本品の乾燥状態を確認の上、各滅菌装置メーカー指定の使用方法に従うこと。
- (2) クリプトック先端の接続部は繊細であり、接続部の脱落の可能性があるため、接続部に負荷を掛けるような曲げや引っ張りを行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し清潔な場所に室温で保管すること。付属品である痔瘻用ゴム紐は水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避けて清潔に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- (1) 使用後は速やかに汚れを拭き取り、石鹸、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
- (2) 蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、十分に水分を拭き取ってから清潔に保管する。
- (3) 高圧蒸気滅菌又はE O G滅菌にて滅菌する。痔瘻用ゴム紐は、E O G滅菌を施すこと。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20 分以上	98.067kPa

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727