

機械器具 4 4 整形用器具器械
一般医療機器 やすり 11701001

骨やすり


【警告】

1. 使用方法


- （1）接触凝固を目的として、電気メス先を本品に直接接触させて使用することは絶対にしないこと。

【形状・構造及び原理等】*


1. 形状

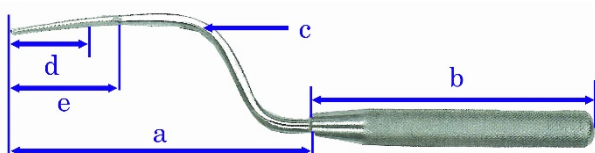

規格	商品コード	弯曲部の直径 c(mm)	刃内部の長さ d(mm)	刃外部の長さ e(mm)
A	LK001A	31.0	36.0	50.0

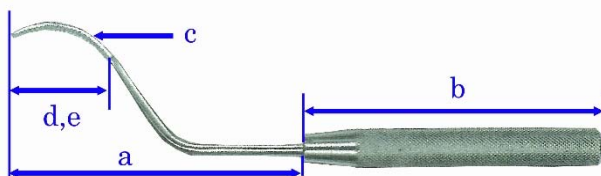

規格	商品コード	弯曲部の直径 c(mm)	刃内部の長さ d(mm)	刃外部の長さ e(mm)
B	LK001B	45.0	35.0	35.0
C	LK001C	45.0	—	30.0

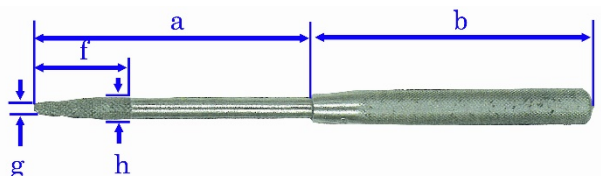

規格	商品コード	刃の長さ f(mm)	刃先端部の直径 g(mm)	刃基部の直径 h(mm)
D	LK001D	35.0	4.5	8.0
E	LK001E	60.0	5.0	8.0
E1	LK001E-1	60.0	4.0	6.0
E2	LK001E-2	60.0	4.0	7.0

a：操作部の長さ 100.0mm

b：把手部の長さ 100.0mm

2. 原材料（接触部の組成）

ステンレス鋼

3. 動作原理*

本品は、骨組織に孔を形成する際に生じた凹凸面を平滑化するために、ピラミッド状の隆起した表面を骨組織に繰り返しこすりあて、手動的に骨の表面を滑らかにする。

【使用目的又は効果】

ピラミッド状に隆起した表面をもつ手持型の手動式外科用器具で、骨組織の平滑化に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作

- （1）処置部の骨に、他の医療機器で孔を形成する。
（2）形成した孔に本品の操作部を挿入し、骨孔窩部の凹凸面が平滑化するまで、繰り返しこすりあわせる。

3. 使用後

【保守・点検に係る事項】1に示すように洗浄、滅菌する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- （1）本品は、未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
（2）使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
（3）破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
（4）金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、表面が破損するので使用しないこと。
（5）使用時に、破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌方法

- （1）水洗いし、付着物を取り除く。
（2）石鹼、又は医療用中性洗剤等を用い、柔らかいブラシ、スポンジ等で軽くこすり洗いをする。
（3）蒸留水または脱イオン水を用い、よくすすぎ、乾燥させる。

(4) 高圧蒸気滅菌、又はE O G 滅菌にて滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	時間	気圧
121℃	20 分以上	98.067kPa

2. 使用者による保守点検事項

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727