

機械器具 52 医療用拡張器

一般医療機器 直腸拡張器具 11262000

ブージー

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

- (1) 高圧蒸気滅菌は施さないこと。[素材の性質上溶けることがある]

【形状・構造及び原理等】*, **

1. 形状*


- (1) ブージー

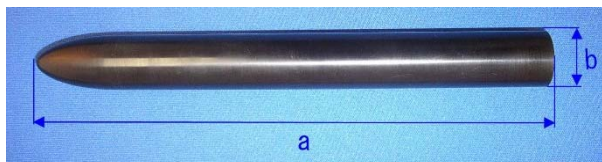

規格	商品コード	全長 a(mm)	直径 b(mm)
セット	KA-193	190.0	
1 号	KA-193-01		
2 号	KA-193-02		
3 号	KA-193-03		
4 号	KA-193-04		
5 号	KA-193-05		
6 号	KA-193-06		
7 号	KA-193-07		
8 号	KA-193-08		
9 号	KA-193-09		
10 号	KA-193-10		
11 号	KA-193-11		
12 号	KA-193-12		
13 号	KA-193-13		
14 号	KA-193-14		
15 号	KA-193-15		
16 号	KA-193-16		
17 号	KA-193-17		
18 号	KA-193-18		

※セットは 1 号から 12 号までの 12 本組。

(2) T 字型ブージー

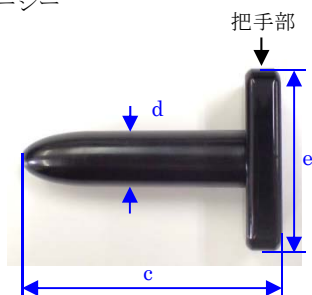

規格	商品 コード	全長 c(mm)	直径 d(mm)	把手部幅 e(mm)
5 号	HL-3965	80.0	16.0	50.0
6 号	HL-3966		17.5	
7 号	HL-3967		19.0	
8 号	HL-3968		20.5	
9 号	HL-3969		22.0	
10 号	HL-39610		23.5	
11 号	HL-39611		25.0	

2. 原材料 (接触部の組成)

ポリアセタール樹脂

3. 動作原理**

肛門に挿入し、肛門括約筋及び肛門の内径を広げる。

【使用目的又は効果】

肛門括約筋及び肛門の拡張。

【使用方法】*

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。

2. 準備・操作*

ブージーは近位端を、T 字型ブージーは把手部を把持し、先細の遠位端を肛門に向け、挿入する。

3. 使用后

【保守・点検に係る事項】1 に示したように洗浄、滅菌し、保管する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- (2) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
- (4) 金属たわし、クレンザー (磨き粉) 等は、表面が破損するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】*

1. 洗浄・滅菌方法*

- (1) 水洗し、付着物を取り除く。
- (2) 洗浄し、乾燥させる。
- (3) 滅菌し、保管する。
- (4) EOG 滅菌にて滅菌する。

2. 使用者による保守点検事項＊

- (1) 本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。
- (2) 汚染防止に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- (3) 仕上げすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。
- (4) 滅菌は本品の乾燥状態を確認の上、行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 20 号

T E L : 03-3811-1131

F A X : 03-3811-1727