

YD テクニックチェア

【警告】


1. 患者及び使用者の手、指、身体の一部を可動部周辺に近付けないこと。[組織障害のおそれ]
2. 電源の接続にはアースの敷設されたコンセントをご利用の上、本製品電源プラグからアース線を必ず接続すること。[感電、誤動作のおそれ]
3. スイッチを ON にした状態で移動しないこと。また、衝撃や振動を与えないこと。[機器故障のおそれ]
4. 妊婦、乳幼児には使用しないこと。[人身事故のおそれ]
5. 被施術者の動作や姿勢に配慮し急激な座面の昇降を行わないこと。[組織障害のおそれ]
6. 所定の担当者以外が操作をみだりに行わないこと。[機器故障のおそれ]
7. 使用しないときは、スイッチを OFF にすること。[誤動作のおそれ]
8. お手入れ、清掃を行う際は、電源プラグをコンセントから抜くこと。[感電、機器故障のおそれ]
9. 電源プラグ、コンセント、アースはほこりが付着しないよう定期的を確認し、清掃を行うこと。[火災のおそれ]
10. 故障したときは、故障中の表示を行い、修理は専門家に任せること。[人身事故のおそれ]
11. 分解や改造を行わないこと。[機器故障、人身事故のおそれ]
12. 【使用方法】の項目以外の方法で使用しないこと。[機器故障、人身事故のおそれ]
13. ペースメーカーの使用者には十分注意すること。[人身事故のおそれ]

【禁忌・禁止】

1. 合計積載量が 120kg を超えないこと。[機器故障のおそれ]
2. 置台には 5kg より大きな負荷をかけないこと。[機器故障のおそれ]
3. 当社製以外のアクセサリは使用しないこと。[機器故障、誤動作のおそれ]
4. 水をかけたり、水のかかる場所に設置したりしないこと。[感電、機器故障のおそれ]
5. 電源コード、アース線、フットスイッチのコードは傷つけたり、傷めやすい場所(ドア、通路)に設置したりしないこと。[感電、機器故障のおそれ]
6. 不安定な場所で使用しないこと。[人身事故、機器故障のおそれ]

【形状・構造及び原理等】

構成

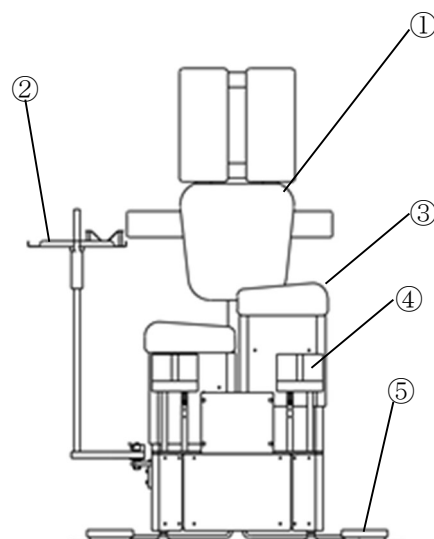

- ① 胸当て
- ② 置台
- ③ 座面
- ④ ひざスイッチ
- ⑤ 足元スイッチ

寸法

巾 500mm 奥行 1200mm 高さ 1350mm

電気定格

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz

【使用目的又は効果】

診療又は処置の為に用いる汎用の診療・処置台。
左右の座面に昇降機能を備える。診療室において用いる。電動式。

【使用方法等】

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ② 電源スイッチをいれ、電源ランプ（緑）の点灯を確認する。
- ③ 座面の昇降動作の確認を行う。（ひざスイッチと足元スイッチの UP と DOWN）
- ④ スライドストッパーを緩め、胸当てを移動させ、被施術者を座面に座らせる。
- ⑤ 胸当てを適切な位置に移動させ、スライドストッパーを締めて、胸当てを固定する。
- ⑥ ヘッドレスト角度調整バーを移動させ、ヘッドレストの傾きを調整する。
- ⑦ 施術しやすい姿勢になるように、ひざスイッチもしくは足元スイッチを使い、左右の座面高さを調整する。
- ⑧ 施術する
- ⑨ スライドストッパーを緩め、胸当てを移動させ、被施術者を立ち上がらせる。
- ⑩ スライドストッパーを締める
- ⑪ 電源スイッチを切る。

【使用上の注意】

警告、禁忌・禁止

本書冒頭【警告】【禁忌・禁止】に記載。

使用注意

ペースメーカーの使用者には十分注意すること。

重要な基本的注意

電源プラグ、コンセント、アースはほこりが付着しないよう定期的に確認し、清掃を行うこと

スイッチを ON にした状態で移動しないこと。また、衝撃や振動を与えないこと。

高齢者への使用は慎重に行うこと。

妊婦、乳幼児には使用しないこと。

【製造販売会社及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売会社

株式会社 ユニオン電器

販売業者

