

機械器具 77 バイブレーター
家庭用電気マッサージ器（34662000）
管理医療機器
YD ポータブルアジャスター

【警告】

施療子の先端（プッシャー）は素肌の上から直接あてないでください。必ず乾いたタオルや服の上からあててください。[体に異常をきたすことがあります]

頭部への施術は行わないでください[体に異常をきたすことがあります]

子供だけで使わせないでください。本体の上に乗ったり、本体の上で遊ばせたりしないでください。

幼児の手の届くところで使用しないでください。

幼児や、ご自分で意志表示ができない方に使用しないでください。

施術の目的以外で使用はしないでください。[故障や事故を起こす恐れがあります]

使用しても効果が現れない場合は、医師または専門家に相談してください。

施術部位に感染症、創傷などの異常がある人や医師の治療を受けている人、また体調に異常を感じている時などは医師に相談の上ご使用ください。

次にあげる方は、使用前に医師に相談してください。

ペースメーカなどの電磁波障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方、悪性しゅよう（腫瘍）のある方、心臓に障害がある方、妊娠初期の不安定期又は出産直後の方、糖尿病などによる高度な末しょう循環障害からくる知覚障害がある方、安静を必要とする方、骨粗しょう症の方、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性「とう（疼）痛性」疾患の方、背骨（せきつい）に異常のある方又は背骨が左右に曲がっている方、体温 38℃以上（有熱期）の方。

有熱期の例

1. 急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。

2. 衰弱しているとき。

医師からマッサージを禁じられている方には使用しないでください。

例

血栓[そく（塞）栓]症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む。）など。

付属品は、指定されたもの以外を使わないでください。[火災、発火、感電、ケガ、故障の原因になります。]

分解・修理・改造は行わないでください。[火災、発火、感電、ケガ、故障を引き起こす恐れがあります。]

機器が故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。

【禁忌・禁止】

電源プラグは必ず、容量 15A 以上の交流コンセント 100V に単独で接続してください。

高温になる場所、湿度の高い場所、ほこりの多い場所、屋外や直射日光の当たる場所で使用や保管をしないでください。

長時間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体を水につけたり、水をかけたりすることは絶対にしないでください。

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンゼン、シンナー）の近くで使用しないでください。

電源プラグや電源コードを扱うときは、次のことを守ってください。

- ・電源コードや電源プラグを乱暴に扱わないでください。

- ・損傷したものは使用しないでください。

- ・濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

- ・電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。

- ・コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。

火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

浴室などの湿気の高いところでは使用しないでください。

製品の上に物を置かないでください。

打振器のケーブルと制御ボックスとの接続は説明通り正しく接続してください。

打振器のケーブルは引きずったり、重荷重をかけたりしないでください。

10 分以上連続運転しないでください。10 分連続運転した場合は 30 分以上時間をあけて使用してください。同じ部位には、1 日 10 分以上使用しないでください。

使用前には必ず、点検をして正常に動作するかを確認し、使用後は電源スイッチを切ってください。


使用中、動作が止まったり、異常音、異常振動が発生したりしたときは、直ちに使用を中止し、電源スイッチを切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、販売元へご相談ください。

身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。

停電の際は、直ちに電源スイッチを切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。

付属の AC アダプターは本製品専用のものです、ほかの機器に使用しないでください。[火災、発火、感電、ケガ、故障の原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

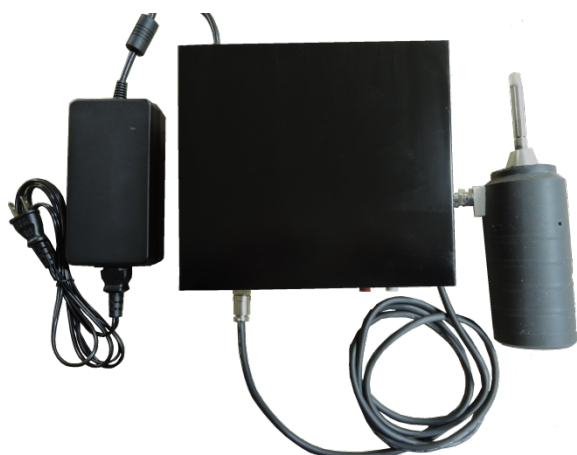

寸法

制御ボックス：巾 200mm 奥行 180mm 高さ 95mm

打振器：直径 55mm 全長 230mm

標準プッシャー：全長：67mm 先端半径 5.0

重量

制御ボックス：1.2kg

打振器：1.0kg

操作ボックスの背面に電源スイッチと AC アダプターの差込口が取り付けられており、付属の AC アダプターより電気を供給する。

操作ボックスの前面の Power ボタンにより、3 段階にたたく強さを調整することができ、Speed ボタンにより、たたく速さを 3 段階に調整することができる。LED ランプが点灯することにより強さと、速さの設定段階を表示する。Counter には何回たたいたか数字が表示される。

手持ちたたき装置の先端を押し込むことにより操作ボックスから電気が供給されソレノイドが動作する。そのエネルギーをばねを通し先端部分に伝え、たたき機能を発現させる。先端部分は取り換え可能になっている。二股の先端には大中小の三種類がある。

定格電圧：交流 100V 50Hz と 60Hz 共用。

定格消費電力：9W

たたき回数：最小約 300 回/分、最大約 425 回/分

【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。

【使用方法等】

- (1) AC アダプターのジャックを操作ボックス背面へ差し込み、AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込む。
- (2) 操作ボックス前面の電源スイッチをいれる。
- (3) Power ボタンを押したたく強さを決める。
- (4) Speed ボタンを押したたく速さを決める。
- (5) 手持ちたたき装置を手で持ち装置の先端を患部に当て装置を押し込む。

(6) たたき動作が開始する。

(7) 手持ちたたき装置を押し込むのを止めることで、たたき動作が終了する。

(8) 電源スイッチを切る。

(9) 長期使用しない場合は AC アダプターの電源コードを抜いておく。

【使用上の注意】

電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みが緩んでいたりするときは、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電、ショート、発火の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

操作スイッチが「OFF」であることを確かめてから、電源プラグを抜き差ししてください。けがをする恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしないでください。感電、発火の原因になります。

本体の上にものを置いたり、振動伝達パッドを強い力で押し付けたり、腰を掛けたりしないでください。破損して感電、けがをする恐れがあります。

1 回の使用時間は、必ず 10 分以内で使用してください。連続的に使用する場合は、30 分中断をもうけ、1 日の使用回数を 3 回までとしてください。健康を害することがあります。

体の異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。

頸部へは 1 分以上使用しないでください。健康を害することがあります。

下記の場合ご使用を中止してください

1. スイッチを入れても動かない。
2. 動いても動きが弱かったり不規則。
3. 手持ちたたき装置が異常に熱い。
4. 異常な音がする。
5. コゲくさいにおいがする。

【保管方法及び有効期間等】

湿気やほこりの少ないところに保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 ユニオン電器

岐阜県中津川市福岡 1114-2

Tel 0573-72-2331

FAX 0573-72-3818