

類別：機械器具12 理学診断用器具 一般的名称：湿式ホットパック装置

JMDNコード：38469000 クラス分類：一般医療機器

販売名 加温器 YS-KA01-1

【警告】

- ①運転中庫内は高温になるので、火傷に注意する。
- ②温度が異常上昇した場合は電源を切る。
- ③電圧及び電気容量が適合していることを確認する。


【禁忌・禁止】

- ①引火性、爆発性物質を入れて使用しないこと。
- ②山一社製ホットパック以外は使用しないこと。
- ③修理技術責任者以外のもので、本機を分解・修理・改造しないこと。
- ④アースを接地しないで使用しないこと。
- ⑤本機に磁力を発生するものを近づけないこと。


【形状・構造及び原理等】(*)

1. 構成
本製品は、以下のユニットにより構成されます。
1) 本体

2. 各部名称

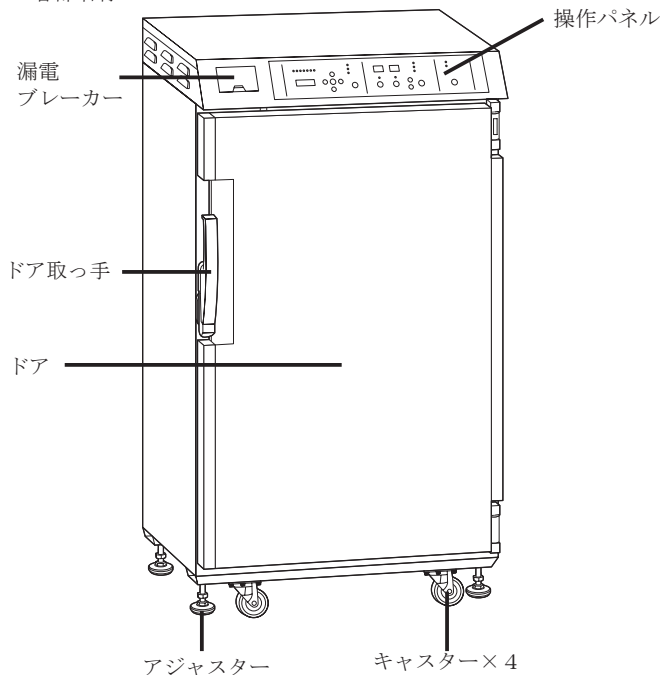

操作パネル

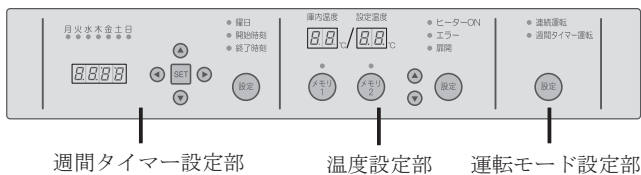

3. 本体寸法及び質量
外形寸法：幅655mm×奥行500mm×高さ1200mm
庫内寸法：幅540mm×奥行412mm×高さ896mm
質量：約110kg
4. 電氣的定格
電源電圧：単相交流100V 周波数50/60Hz
電源入力：700VA
5. 電磁両立性
本製品はEMC規格 JIS T 0601-1-2:2012 に適合している。
6. 機器の分類
電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器
7. 作動原理
乾式ホットパックを庫内に入れ、任意に設定された温度で加温する装置。

【使用目的または効果】

温熱効果。

【使用方法等】

本製品の使用方法の概略を以下に述べる。

- ①電源を入れる。(ON)
- ②ドアを開く。
- ③カゴにホットパックを収納する。
- ④ドアを閉じる。
- ⑤運転モードを選択する。(連続運転又は週間タイマー運転)

週間タイマー運転モードの場合の設定方法

- ①操作パネルの週間タイマー設定部の設定ボタンを押す。
- ②タイマー設定時刻切り替えボタンを押して、曜日を選ぶ。
- ③セットボタンを押す。
- ④タイマー設定時刻切り替えボタンを押して、開始時刻を設定する。
- ⑤セットボタンを押す。
- ⑥タイマー設定時刻切り替えボタンを押して、終了時刻を設定する。
- ⑦セットボタンを押す。
- ⑧設定ボタンを押す。

以上で、週間タイマーがセットされます。

【使用上の注意】

- ①機器の庫内、カゴ、ホットパックは高温になるので、火傷に注意すること。
- ②ドアを閉めるときは、指を挟まないように注意すること。
- ③山一製のホットパック以外は加温しないこと。
- ④ホットパックは詰めすぎないようにすること。
- ⑤操作パネル、漏電ブレーカーに水をかけないこと。水がかかった場合は、直ちに拭き取ること。
- ⑥電源容量は、AC100V、15A以上が必要。また、同じコンセントから他の器具を同時に使用しないこと。
- ⑦アースを必ず接続すること。ただし、ガス管や水道管への接続は行わないこと。
- ⑧以下のような場所で、使用しないこと。
 - 1) 水のかかる場所。
 - 2) 直射日光の当たる場所。
 - 3) 高温・多湿な場所。
 - 4) 屋外。
- ⑨誤作動などに異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、漏電ブレーカーを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
- ⑩専門修理技術者以外は、機器を分解したり、修理及び改造をしないこと。

【保守点検に係る事項】

[使用者による保守点検事項]

日常点検

- ①本機の上に物を乗せたりしていないか。
- ②漏電ブレーカーの動作確認
- ③カゴの収納確認。
- ④ドアの開閉確認。
- ⑤操作パネルの表示確認

[業者による保守点検事項（有料）]

定期点検（年1回）

- ①ヒーターの通電確認
- ②ドアマイクロスイッチの反応確認
- ③ドアパッキンの劣化・磨耗確認
- ④ドア取っ手の劣化・磨耗確認

【保管方法及び有効期間等】

[設置環境（温度、湿度等）]

- ①使用場所 屋内
- ②周囲温度 5℃～35℃
- ③相対湿度 15%～85%（但し結露なきこと）
※温度35℃の場合、湿度48%以下
湿度85%の場合、湿度28℃以下
- ④標 高 0～2000m

[耐用期間]

指定された正規の保守点検を行なった場合、4年

[自己認証（当社データ）による]

[医療機器の廃棄]

機器や交換した部品を廃棄するときは、感染予防を充分に行い、その時点での法規制に従い、適切な処理をしてください。

[包装] 1台／箱 紙製ダンボールによる梱包

【製造販売業者の名称及び住所等】

名 称：株式会社湯山製作所

住 所：大阪府豊中市名神口1-4-30(**)

電話番号：06-6868-5140(**)

主要文献及び文献請求先も同じ。（*）