

類別 機械器具(13)聴診器
一般的名称 機械式聴診器
販売名 カラー聴診器

文書番号A-2

【禁忌・禁止】

1. 本製品を改造、分解しないで下さい。
2. 部品などに破損等がある場合は使用しないで下さい。
3. チェストピースに衝撃や大きな音を加えると耳が損傷します。
4. 聴診器を振り回すと危険です。

【形状・構造及び原理等】 * 右図参照

1. チェストピース : アルミニウム
2. イヤーチップ : PVC
3. 耳金具 : クロームメッキ
4. Yチューブ : PVC

形状については、本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号等については包装ラベルに記載されているので確認すること。

原理: 集音し易いように各部品を通じて耳に伝える。

【使用目的又は効果】


生体音を直接聴診する。

【使用方法等】


1. チューブをヘッド及び耳金具に接続する。
2. イヤーチップを適正な角度にて両耳に当てる(耳の前面約15°位の角度)
3. シングルヘッドは振動板面を使用する。
4. ダブルヘッドはシャフトの切り替えにより選択する。
5. 選択した面を生体に当て聴診する。

【使用上の注意】

1. 使用中にヘッドに衝撃や大きな音を加えると耳に障害をきたす恐れがあります。
2. 全ての部品が正しくセットされていることを確認してから使用してください。
3. 本製品を熱したり、溶かしたり、オイル等を付けないで下さい。
4. 本製品を直射日光に曝せないで下さい。
5. ヘッド、及びイヤーチップの消毒は消毒用エタノールでして下さい。
6. 本製品に薬品、血液等が付着した場合は使用しないで、必要な部品交換をして下さい。

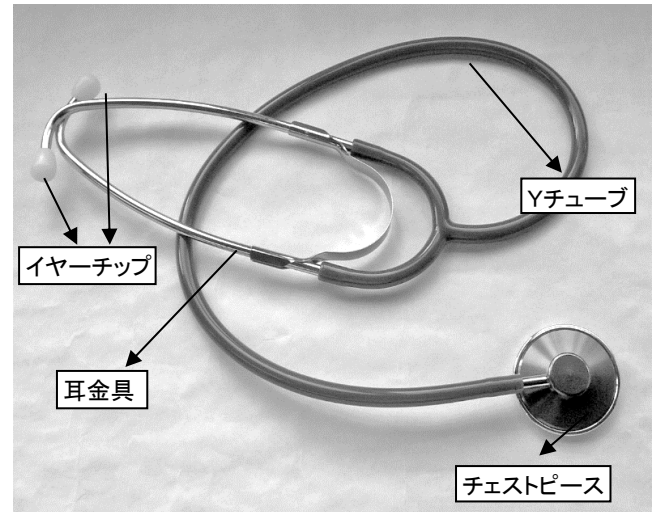

チェストピース

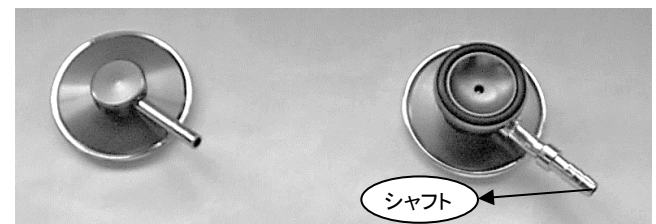

シングルヘッド(片面タイプ)

ダブルヘッド(両面タイプ)

【保管方法及び使用期間等】

1. チューブを折り曲げて保管しないでください。
2. 直射日光を避けて、通常の室内で保管してください。

使用期間について、3年以内(自己認証)

【保守・点検に関わる事項】

1. 本製品は繰り返し使用される器具ですので、衛生上及び安全上注意して、常に確認する事。
2. 本製品の汚れ等は、薄めた中性洗剤をつけた布などで拭き取ってください。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社 (製造販売業者)
〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496
Email : info@adscope.co.jp