

類 別 機械器具(18)血圧検査又は脈波検査用器具
一般の名称 アネロイド式血圧計
販 売 名 大型アネロイド血圧計スタンド型

文書番号 A-33

【形状・構造など】 *右図参照

1. 腕帯 : コットン又はナイロン及びマジックテープ付き
 2. ゴム袋 : ラテックス製、袋部とチューブ部
 3. メーター : 20~300mmHg
 4. エンドバルブ : プラス製 エアーを入れて、逆止する
 5. エアーバルブ : プラス製 エアーを排気する
 6. ゴム球 : ラテックス製
 7. スタンド部:ステンレス
- 形状については、本添付文書に該当する製品の製品名、タイプ等については包装表示ラベルに記載されているので確認の事。

MRI用は非磁気ステンレス製スタンドを使用、その他非磁気製部品を使用
MRIが作動中は使用できません

【使用目的又は効果】

非観血式聴診法による人体の血圧値測定
聴診器による血圧測定するので別に聴診器が必要です

【使用方法等】

1. 各部の接続が正しい事を確認する。
2. 腕帯を腕に巻きとめる。
3. エアーバルブを軽く締める。
4. ゴム球で加圧する。
5. エアーバルブをゆるめ、最高値と最低値を測定する。
6. 測定後エアーバルブを全開してエアーを排気する。

【使用上の注意】

1. 本製品は、使用するために必要な知識、技術に習得した医療従事者が使用するように設計されていますので、十分に理解して使用の事。
2. 300mmHg以上に加圧するとメーター部が破損し精度がくりますので、絶対にしない事。
3. 付属の腕帯は標準成人用です、それ以外に肥満用、小児用、幼児用とありますので、それぞれに合った腕帯を使用して下さい。
4. 本製品に血液等が付着した場合は使用しないで、必要な部品交換して下さい。
5. 本製品は天然ゴムを使用しておりますので、ゴムアレルギーの可能性あります。アレルギー性症状を起こした場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談して下さい。


【保管及び使用期間等】

本製品は、高温、高湿を避け、ちりやほこりのない室内で保管してください。


使用期間は3年間

【保守・点検に関わる事項】

1. 本製品は、日常点検し器具は正常に機能することを確認する事。
2. 本製品のメーター部は定期的に精度を点検する事。
3. ゴム部品は長時間使用すると劣化、亀裂等を起こしますので交換する事。

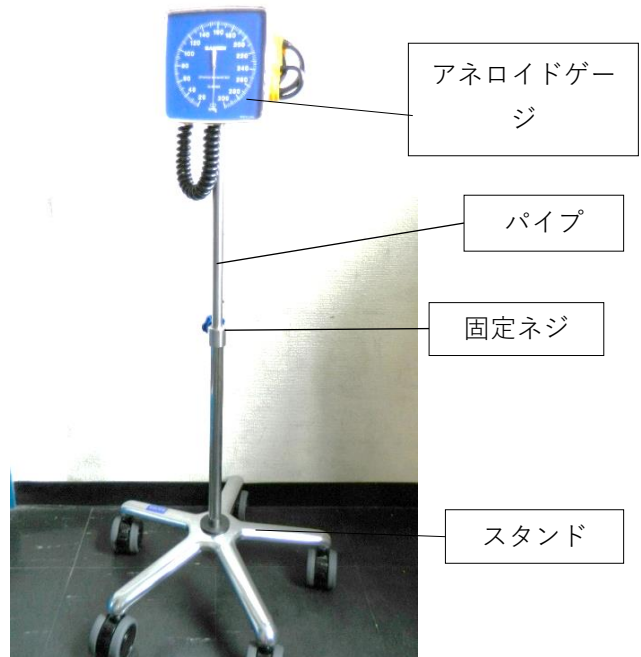

全体図

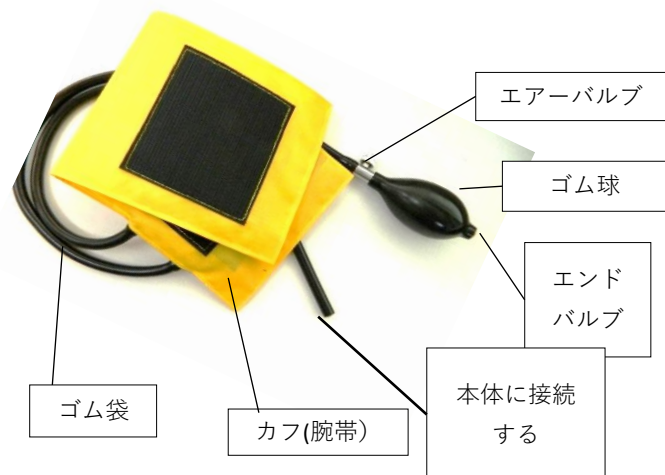

MRI 用はメタル製バスケット、延長コードは含まれません。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)
〒111-0042 東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496