

ラングボードシステム

【禁忌・禁止】

「使用方法」


- * 1. 寝台の先端からはみ出した状態で本品が設置されている場合は、使用しないこと。【患者の位置決め・固定精度に影響を及ぼすおそれがある。また、製品の損傷につながるおそれがある】

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は画像診断または放射線治療時に患者の胸部を適切に位置決め、固定する為に使用するものであり、ベースプレート、ハンドグリップから構成されるものである。

* 2. 構造

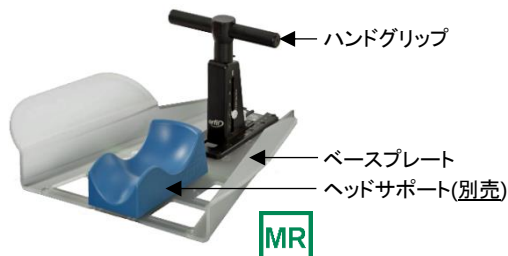

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は放射線治療時に患者の胸部を適切に位置決め、固定する為に使用するものである。

【使用方法等】

1. 使用準備

- * (1) インデックスバー(別売)を画像診断装置または放射線治療装置の寝台(別売)に接続する。



- (2) ベースプレートにハンドグリップを接続する。



- * (3) インデックスバー(別売)のピンの上にベースプレートを挿し込み、ベースプレートを設置する。



- (4) 必要に応じて、ヘッドサポートをベースプレートの対応する場所に接続する。




2. 使用中の操作

- (1) 仰向けの状態で患者をベースプレートに寝かせる。
- (2) 患者の両腕を頭の上に上げ、患者の両手でハンドグリップを握る。



- (3) 必要に応じて、ハンドグリップの位置を調整する。

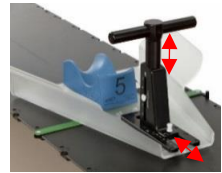

- (4) 画像診断撮影または放射線治療を開始する。



3. 安全性の確認

- * (1) 画像診断装置または放射線治療装置の寝台(別売)からベースプレートが動かないように、接続状態を確認する。
- (2) 患者体位の位置決めや固定状態が適切であることを確認する。

4. 使用後の処置

- * (1) ベースプレートを画像診断装置または放射線治療装置の寝台(別売)から外す。
- (2) 必要に応じて清掃・消毒を行う。
- 5. 保管・管理方法
- (1) 破損等のおそれがない安全な場所に保管する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) ベースプレートは平面な治療寝台に設置すること。
- * (2) ハンドグリップの位置調整を行う場合は、指を挟まないように注意し、作業を行うこと。
- * (3) 本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。「自己認証による」

2. 不具合・有害事象

- (1) その他の不具合・有害事象
- 1) バリ等の物理的損傷、コーティング剥がれ
- 2) 経年劣化によるハンドグリップのバネの損傷

3. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- (1) 妊婦及び妊娠の疑いのある患者、及び授乳中の患者へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。
- (2) 小児患者は意図せず動くことがあるので、患者の体位が適切に固定されていることを十分に注意し、使用すること。また、使用中も常に状態を監視すること。

4. その他の注意

- (1) 本品を使用し治療を行う際には、患者から目を離さないように注意すること。
- (2) 治療中に製品および患者に異常が認められたら、患者を安全な状態にしてから治療を中止するなど適切な処理を講ずること。
- (3) 治療寝台に固定する前に、治療寝台の天板にゴミ等の異物が付着していないことを確認してから固定すること。
- (4) 製品に過度に負荷をかけたり、硬いものをぶつけたりしないこと。傷、バリ、コーティングの剥がれがある状態で使用すると、患者の身体に思わぬ傷を負わせる可能性があるため、使用を控え、速やかに当社まで連絡すること。
- (5) 本品を清掃する場合は、柔らかい布に水または石鹸水を軽く湿らせ、軽く拭くこと。エアゾールスプレー、プラスチックへの腐食性がある洗剤、研磨剤を使用して清掃しないこと。
- (6) 本品を廃棄する場合は、産業廃棄物となるので必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

保管温度：10-40℃

その他：多湿、直射日光および水濡れを避け、清潔な換気のよい場所に保管すること。

* 2. 耐用期間

設置後10年間【自己認証(当社データ)による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

Euro Medi Tech
ユーロメディテック株式会社

TEL

03-5449-7585

Website

www.euro-meditec.co.jp

製造業者

ORFIT Industries n.v.
オルフィット インダストリーズ

輸入先国名

ベルギー王国