

エンドキャビティバルーン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

「使用方法」

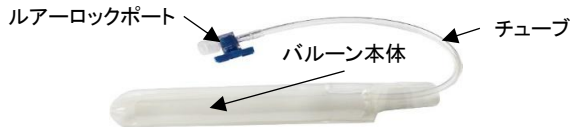
- * 1. 使用後の製品の再使用、及び再使用を意図した滅菌、その他処理を行わないこと。【感染症の原因となる】

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、バルーン本体、チューブ及びルアーロックポートが接続された状態で構成される。超音波伝達媒体である生理食塩水を、ルアーロックポートからチューブを介してバルーン本体に注入することでバルーン本体が膨らみ、超音波の伝達を補助する。

2. 形状・寸法



3. 材質

バルーン本体：ポリウレタン

4. 原理

超音波診断装置用プローブに装着したバルーン本体に、超音波伝達媒体である生理食塩水を注入し膨らませ、患者体腔内の診断部位と接触させることにより、空気等による超音波伝達の阻害を抑制する。

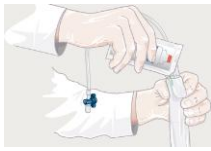
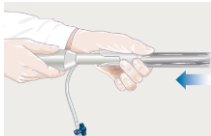
【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は超音波画像診断装置用プローブに装着し、超音波伝達媒体を封入するためのバルーンとして使用する。

【使用方法等】

1. 使用準備

- * (1) バルーン本体の内側、又は超音波診断装置用プローブ(別売)の表面にゲルを塗布する。
- * (2) チューブが超音波診断装置用プローブ(別売)の中心軸と合うように、超音波診断装置用プローブ(別売)をバルーン本体に挿入する。
- (3) 汎用注射筒(別売)に生理食塩水を30cc入れる。
- * (4) 汎用注射筒(別売)をルアーロックポートに接続し、バルーン内の空気が残らないよう10～20ccの生理食塩水を注入する。
- * (5) 超音波診断装置用プローブ(別売)の先端を下向きに持ち、バルーン内の気泡を取り除く。

2. 使用中の操作

- * (1) 本品に挿入された超音波診断装置用プローブ(別売)を患者体腔内の診断部位に配置する。
 - * (2) 超音波診断装置用プローブ(別売)が診断部位に接触するよう10～20ccの生理食塩水を注入し、バルーン本体を調節する。
 - * (3) 超音波診断装置(別売)の操作方法に従い、診断を行う。
- #### 3. 使用後の処置
- * (1) バルーン本体から生理食塩水を抜き、超音波診断装置用プローブ(別売)と共にゆっくりと引き抜く。
 - * (2) バルーン本体を超音波診断装置用プローブ(別売)から取り外す。
 - (3) 本品を適切な方法で速やかに廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- * (1) 本品を超音波診断装置用プローブ(別売)に挿入する際は、バルーン本体にしわがなく、気泡が入らないよう強く引くこと。
 - (2) バルーン本体を膨らませる際は、生理食塩水を過度に注入しないこと。
- #### 2. その他の注意
- (1) 廃棄する場合は医療用廃棄物として適切な措置を行うこと。なお、本品を廃棄する際は産業廃棄物となるので、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼すること。
 - (2) 以下の条件で保管することを推奨する。
保管温度: 11-29℃
その他: 多湿、直射日光および水濡れを避け、清潔な換気のよい場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

Euro Meditech

ユーロメディテック株式会社

TEL

03-5449-7585

Website

www.euro-meditec.co.jp

** 製造業者

CIVCO Medical Instruments Co., Inc.

DBA CIVCO and CIVCO Medical

Solutions

シブコ メディカルインスツルメンツ コーイン

ク ディーピーイー シブコ アンド シブコ

メディカル ソリューションズ

輸入先国名

アメリカ合衆国