

器具器械（30）結紮器及び縫合器  
一般医療機器 結さつ器 12332000  
**アルパテック ノットプッシャー**


**【警告】**

使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと（折損、曲がり等の原因となる）。

**【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

本品は、症例・術式・使用部位等により、形状・サイズが異なる品種が存在する。主な形状を以下に示す。

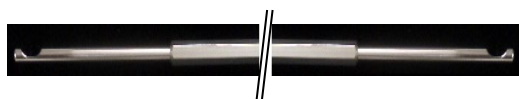

2. 原理

血管又は組織等を結紮する際、縫合糸等の結び目を適切な位置に運び込む。

3. 原材料\*

ステンレス鋼，PEEK

**【使用目的又は効果】**

本品は、血管又は組織等を結紮する際、縫合糸等の結び目を適切な位置に運び込むために使用する手術器具である。

**【使用方法等】**

- ・本品は未滅菌品であるので、使用前に滅菌をおこなうこと。
- ・使用後に洗浄、滅菌することで再使用可能である。
- ・適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器による標準的滅菌条件又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件で滅菌を行うこと。

標準的滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌

| 滅菌温度 | 保持時間 |
|------|------|
| 121℃ | 15 分 |
| 126℃ | 10 分 |
| 134℃ | 3 分  |

・使用方法例

縫合糸等の結び目を本品にて最適な位置に運び込み血管又は組織等を結紮する。必要に応じて複数回繰り返し、強固に固定する。

**【使用上の注意】\*\***

使用前にキズ、割れ、さび、接合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。

**【重要な基本的注意】**

- ・本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- ・貸与された機器がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業社に連絡すること。

**【保守・点検に係る事項】**

1. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する（強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので使用しないこと）。
2. 汚物除去及び洗浄時に金属たわし、クレンザー（磨き粉）等を使用しないこと（器具表面が損傷する）。
3. 超音波洗浄装置を使用する場合は装置の取扱説明書に従って器具の隙間、嵌合部に異物等がないことを確認できるまで洗浄すること。
4. 複雑な構造を有する器具は分解した状態で洗浄すること。特に隙間、嵌合部は柔らかいブラシ等で入念に洗浄し、異物がないことを確認すること。
5. 中空状の器具の洗浄では、棒状のクリーナーで内部の組織、残屑を除去してから洗浄すること。
6. 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。
7. 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥をすること。
8. 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。
9. 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、ラチェット部等の可動部は開放するなど、確実に滅菌できるように配慮すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社ユニメディック

住 所：大阪市北区西天満 3-6-28 オクタス西天満ビル  
2 階

連 絡 先：06-6316-7330

製 造 業 者：株式会社アルパテック