

取扱説明書を必ず参照する承認・届出等 販売名 **アトミックフラスコシリンダーセット**


形状・構造及び原理等

セット内容

1. 製品外観図



①	フラスコ上倫
②	フラスコ下倫
③	上蓋
④	下蓋
⑤	六角スクリュー M8×40
⑥	レジソシリンダー
⑦	シリンダー押
⑧	オーリング P40
⑨	スプリング
⑩	つまみ M4×15
⑪	ホルダ
⑫	つまみ固定金具

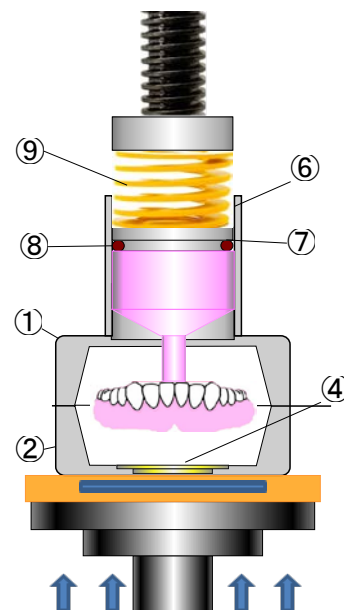

使用目的、効能又は効果

当該フラスコを使用して、歯科用油圧プレス又はエアプレスのテーブル上に置き、レジソを加圧填入する事を目的とする器具、常温重合レジソの填入時は、レジソの重合収縮を余剰レジソで補う為のスプリングを有する。(保圧機能)

操作方法又は使用方法等

- 1) 通法に従い下倫に鑄堤を埋没します。
 - 2) 硬化後、上倫をセッして、セッターにワックスプルーを付けて上蓋から出します。
 - 3) 上蓋を外して、石膏で鑄堤を埋没します。
 - 4) 通法に従い石膏硬化後、脱漏します。
 - 5) 分離材塗布後、上倫、下倫を六角スクリューで固定します。
 - 6) レジソシリンダーにレジソを填入します。
 - 7) レジソの入ったレジソシリンダーをフラスコの上にセッします。
 - 8) シリンダー押さえを押し込みます。
 - 9) 油圧プレス又はエアプレスのテーブル上にセッして加圧します。
 - 10) 填入完了確認
- フラスコ埋没後、バネを付けておき、填入時、レジソがバネから漏れ出る事を確認する事によって、レジソ填入完了を確認後、付属つまみを締めて、保圧を行います。(図 1)

使用上の注意

詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

1) 本製品は、エアプレス、油圧プレス等のテーブルの中心に置いて使用して下さい。

2) 使用するプレスの最高加圧は 2ton を超えて使用しないで下さい。

破損、変形の原因となります。

貯蔵・保管方法及び使用期間等

1) 貯蔵・保管方法

- (1) 水のかからない場所に保管する事。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管する事
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等に対する安定状態に注意する事。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない事。

2) 耐用期間（製造日から正規の保守点検を行った場合に限り 7 年間とする。）

保守・点検に係る事項

詳細については、取扱説明書の保守点検の項をご使用前に必ずお読みください。

- 1) 部品の劣化パーツの破損等は必ず定期点検を行う事。

包装 1 梱包／1 セット

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

氏名又は名称 有限会社 アトミック (第三種医療機器製造販売業)

住所等 〒534-0023

電話番号

大阪市都島区都島南通 1 丁目 14-4

TEL 06-6330-0428 FAX 06-6330-1655

図 1

