


機械器具 17 血液検査用器具
一般医療機器 移動式免疫蛍光分析装置（35707020）
特定保守管理医療機器


スキャン@poc U1

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

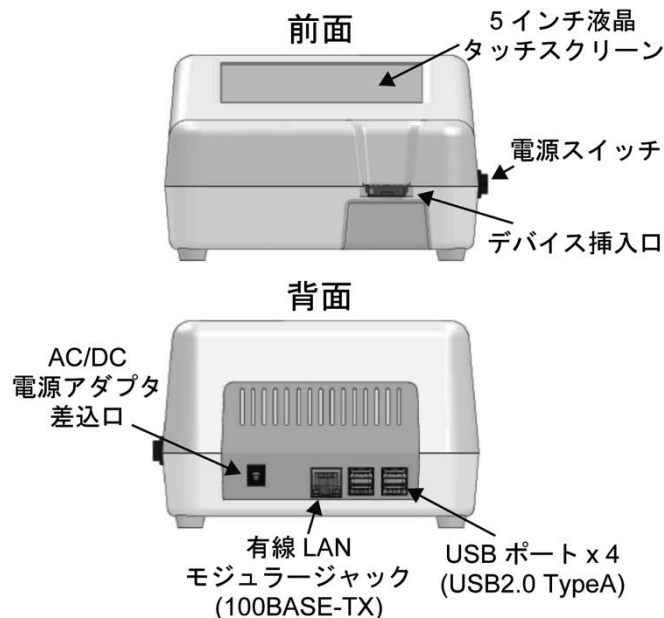

【使用方法等】

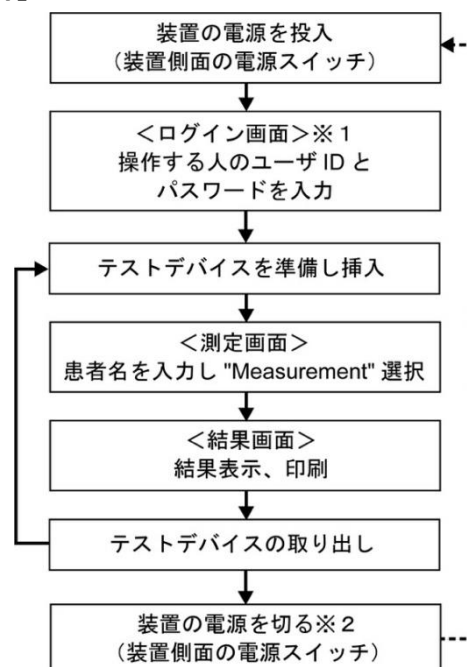

外形寸法	216 (縦) × 170 (横) × 108 (高さ) mm
重量	1040 g
電源アダプタ	入力: 交流 100 ~ 240 V、50 ~ 60 Hz 出力: 直流 19 V 2.4 A
動作環境	温度: 15 ~ 35 °C、 湿度: 20 ~ 80 % (結露しないこと)

2. 原理

本装置は別売の体外診断用医薬品であるテストデバイス専用の測定装置である。検体を添加したテストデバイスに励起光(LED)を照射し、検体中の抗原-蛍光標識物質結合体の蛍光強度をフォトダイオードで受光し、予め入力した検量線から検体中の抗原量を測定する。

【使用目的又は効果】

検体中の成分を蛍光試薬と反応させ、蛍光試薬から発せられる蛍光強度を検出し、抗原/抗体量を自動測定する装置です。

※1: 自動ログイン設定を選んだ場合、ログイン画面をスキップ可能です。

※2: 装置を長時間使用しない場合、電源を切して下さい。

【使用上の注意】

1. 本装置(スキャン@poc U1)専用の体外診断用医薬品と共に使用して下さい。
2. 本装置を使用する際は、本書及び取扱説明書をよく読み正しくお使い下さい。
3. 本装置は直射日光が当たらない場所で使用して下さい。
4. 測定中は本装置を動かさないで下さい。
5. 本装置を落下させたり、水に濡れないように使用して下さい。
6. 電源コード、電源アダプタは同梱されているものを使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 温度 1 ~ 35 °C、相対湿度 20 ~ 80 % (結露しないこと)

有効期間: 使用開始から 5 年間(自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守・点検事項:

使用者が実施する保守点検作業は外面のクリーニング以外ありません。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

〈製造販売元・問い合わせ先〉

株式会社ユーエムエー

〒270-0031 千葉県松戸市横須賀 2-19-6

TEL: 047-710-4871(ダイヤルイン) FAX: 047-710-4872

取扱説明書を必ずご参照下さい

〈製造元〉

アルファクス株式会社

〒211-0042 神奈川県川崎市中原区下新城 3-13-13

TEL: 044-755-6661(代) FAX: 044-755-6392

取扱説明書を必ずご参照下さい