

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ (JMDN 32692000)

ラビスタクリップ

【警告】

- ・本製品の分解、改造、修理を行わないで下さい。
 - ・本ルーペを使用して太陽やレーザー光、光源などの強い光を見ないで下さい。眼球に有害な影響を与える可能性があります。
 - ・引火性のアルコール、ベンジン、又は類似薬品等、揮発性又は引火性の溶剤のあるところでは使用しないで下さい。
 - ・本器を滅菌しないこと。変形や破損する可能性がある為。
 - ・本製品の光源を見つめたり、連続して目（眼球）を照射したりしないで下さい。[目の組織（網膜）に障害を引き起こす危険性があります。]
 - ・皮膚への損傷を最小限とするために、次の事項を守って下さい。[皮膚が損傷する危険性があります。]
- 1)照射時間を最小限にしてください。
2)皮膚損傷がある場合や、麻酔の使用により、皮膚感度が変化している場合は特に注意してください。

〈ルーペ付きライト〉

【形状・構造及び原理等】

1、構成

- ①ライト付きルーペ ②コネクコード
③バッテリー ④USB ケーブル ⑤充電用アダプタ



2、寸法及び重量

①ライト付きルーペ (クリップ含む)	33Wx83Dx44Hmm	42g
②コネクコード	800mm	21g
③バッテリー	104Wx48.5Dx31Hmm	92g
④USB ケーブル	タイプ C 1000mm	24g
⑤充電用アダプタ	60Wx35Dx25Hmm	35g


〈ルーペ〉

1、ルーペ構成

〈ラビスタクリップ固定式〉


1) 2.5 倍ルーペ構成 (ラビスタクリップ F2.5)

- ①2.5 倍用ルーペ ②取付バー

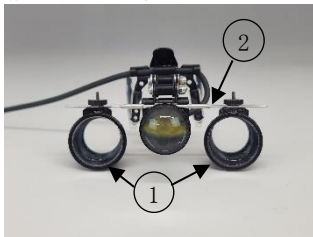


2) 3.0 倍ルーペ構成 (ラビスタクリップ F3.0)

- ①3.0 倍用ルーペ ②取付バー

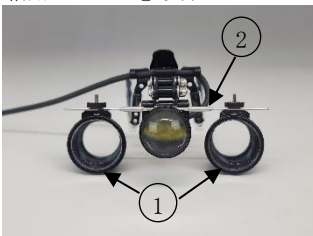

3) 3.5 倍ルーペ構成 (ラビスタクリップ F3.5)

- ①3.5 倍用ルーペ ②取付バー

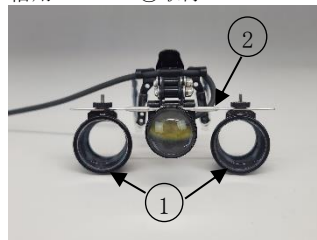

〈ラビスタクリップ固定式タッチレス〉



1) 構成

- ①タッチレス
*タッチレス以外の構成はラビスタクリップ固定式と同一です。


2) 寸法及び重量

- ①タッチレス 45WX21DX15Hmm 9g

〈ラビスタクリップ跳ね上げ式〉


1) 2.5 倍ルーペ構成 (ラビスタクリップ M2.5)

- ①2.5 倍用ルーペ ②取付バー

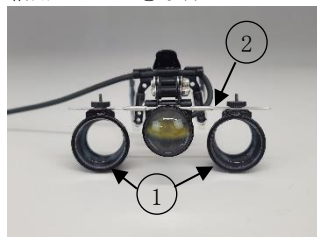


2) 3.0 倍ルーペ構成 (ラビスタクリップ M3.0)

- ①3.0 倍用ルーペ ②取付バー

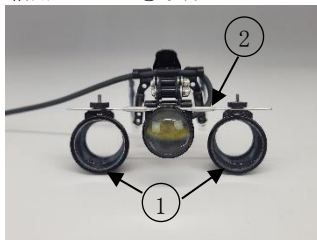

3) 3.5 倍ルーペ構成 (ラビスタクリップ M3.5)

- ①3.5 倍用ルーペ ②取付バー

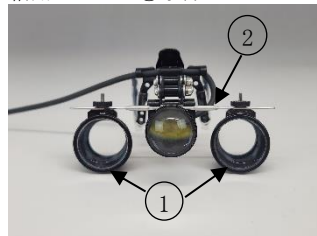

〈ラビスタクリップ跳ね上げ式タッチレス〉



- 1) 構成
 - ①タッチレス
*タッチレス以外の構成はラビスタクリップ固定式と同一です。
- 2) 寸法及び重量
 - ①タッチレス 45WX21DX15Hmm 9g

2、ルーペの寸法及び重量

- 1) ラビスタクリップ固定式
 - ①2.5倍ルーペ 24Wx 18Dx 16.5Hmm 22g
 - 3.0倍ルーペ 24Wx 18Dx 18Hmm 24g
 - 3.5倍ルーペ 24Wx 18Dx 19.5Hmm 25g
 - ②取付バー 84Wx 4Dx 1Hmm 2g
- 2) ラビスタクリップ跳ね上げ式
 - ①2.5倍ルーペ 24Wx 18Dx 16.5Hmm 22g
 - 3.0倍ルーペ 24Wx 18Dx 18Hmm 24g
 - 3.5倍ルーペ 24Wx 18Dx 19.5Hmm 25g
 - ②取付バー 84Wx 4Dx 1Hmm 2g

3、ルーペ作動距離・視野直径

〈ラビスタクリップ固定式〉

シリーズ	倍率	作動距離	視野直径
ラビスタクリップ F2.5	2.5x	30～60cm	10～14cm
ラビスタクリップ F3.0	3.0x	30～60cm	8～12cm
ラビスタクリップ F3.5	3.5x	30～60cm	6～10cm

〈ラビスタクリップ跳ね上げ式〉

シリーズ	倍率	作動距離	視野直径
ラビスタクリップ M2.5	2.5x	30～60cm	10～14cm
ラビスタクリップ M3.0	3.0x	30～60cm	8～12cm
ラビスタクリップ M3.5	3.5x	30～60cm	6～10cm

4、原理

ルーペは対物レンズにて物体の光を集め、焦点に作られた実像を接眼レンズにより拡大することで、物体を拡大して観察することができる。ライトはLED光源を対物レンズによって集光させることにより、視野を明るくして物体をより見やすくする。ルーペとライトを一体化することにより、より明るく鮮明な拡大像を得ることができる。

*【使用目的又は効果】

本品は外科処置や診断時に術者が眼鏡にルーペとライトが一体となったシステムを装着し、観察野の拡大像を得ることを目的とした双眼ルーペシステムである。ライトを接続することにより、より明るく鮮明な拡大像を得ることが可能となる。

*【使用方法等】

＜準備＞

- 1) ルーペ本体クリップ部を術者のめがねの中央部に装着する。
- 2) ライトコードをめがねの柄に沿ってOリングで固定する。
- 3) タッチレス有の場合は付属アタッチメントで柄に固定する。
- 4) ライトコードにコネクタコードを接続する。
- 5) バッテリーにコネクタコードを接続する。
- 6) コードを耳に掛け、首の後ろに廻してバッテリーをポケットに入れる。
- 7) 両眼の焦点が合致するように、取付バー上のルーペの取付位置を調整してねじで固定する。

＜使用＞

- 1) スイッチをONにする。
- 2) 使用時の姿勢に合わせて、ルーペ本体ヒンジ部を上下に可動させ、角度調整して見やすい位置にルーペ位置を設定する。

- 3) ルーペの取付バー上の位置を左右の目の間隔に合わせて調整して、両眼にて視点が合致して（覗いたルーペが左右一つになるように合わせる）見やすい位置に設定する。
- 4) ルーペの焦点距離合わせは、ルーペ本体の接眼部分を回転させて調整する。接眼部分の調整は視線方向より、右回りにて焦点距離が遠くなり、左回りにて焦点距離が近くなる。
- 5) 術者の左右の目の視力誤差が調整できる。ルーペ接眼側を回転させ、ピントが合う位置に合わせる。
- 6) 覗いたルーペ内にライトが全体に照らすように調整する。
- 7) ライトの調光はバッテリーの無段階調光ダイヤルにて行う。
- 8) 使用後はスイッチをOFFにする。

〈ラビスタクリップ固定式・跳ね上げ式タッチレス〉

- 1) ～7) は同一です。
- 8) センサー部に手を前後に振るとON/OFFする。
- 9) ライト点灯中にセンサー部に手をかざすと照度がアップ、ダウンする。
- 10) 使用後はバッテリーのスイッチをOFFにする。

【使用上の注意】

- 1) 使用時には取扱説明書に記載の使用方法を十分に確認する。
- 2) 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 3) 気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含む空気などにより、悪影響を生じる恐れのない場所で使用すること。
- 4) 振動、衝撃等の安全状態に注意すること。
- 5) 化学薬品やガスの発生する場所で使用しないこと。
- 6) 本品は防水構造ではありません。水漏れなどが発生した場合は直ちに電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いた上で乾燥した布などで十分拭き取って下さい。内部に水などの侵入の恐れがある場合には、点検を受け、安全が確認されるまでご使用しないで下さい。[電気ショック又はショートを受ける危険性があります。]
- 7) 本製品のLED周辺部分は温かくなります。ライト角度調整時には注意して行って下さい。
- 8) 本製品に使用するACアダプタ及びオプション等は弊社指定のもの以外は使用しないで下さい。[故障の原因になります。]
- 9) 使用中は器具に異常が無いことを絶えず監視して異常が発見された場合は、使用を停止する等の適切な措置を講ずること。
- 10) 使用前には各部の緩み、可動部の異常、レンズの傷、汚れなどを点検し、安全を確認すること。
- 11) 特に使用時におけるライトコードコネクタ部及びバッテリー接続部は、負荷が掛かり易いので気をつけて下さい。[断線の恐れがあります。]
- 12) 本製品は滅菌などの措置はできません。[故障の原因となります。]

*【保管方法及び有効期間等】

- * [保管方法]
以下の条件で清潔に保管して下さい。
温度：-20℃～40℃、湿度：95%以下
- * [耐用期間]
(適切な使用及び保管条件下のもと) 5年間

【保守・点検に係わる事項】

- 1) 本製品は清掃したのちにケースに収納し、火気や水気がなく、落下しない安全な場所に保管すること。
- 2) ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気による悪影響を受ける恐れのない場所に保管すること。
- 3) 傾斜のない、振動や衝撃などがかからない場所に安定状態にて保管すること。
- 4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

＜クリーニング＞

- ・ライト本体はレンズ部を含め、アルコールを湿らした柔らかい布でクリーニングできます。
- ・バッテリー及び充電用アダプタも、アルコールを湿らした柔らかい布でクリーニングが出来ます。
- ・中性洗剤等のご使用は避けて下さい。

＜バッテリーの充電＞

- 1) バッテリースイッチをOFFにする。

- 2) ライト本体コードをバッテリーから外す。
- 3) 充電用アダプタに USB ケーブルを接続し、コンセントに差し込む。
- 4) USB ケーブルをバッテリー底面の USB Type-C コネクタに接続する。
- 5) バッテリーの充電ランプが赤に点灯し、充電を開始する。充電完了するとランプは青に点灯する。
- 6) 充電電池の消耗具合により、充電時間は異なります。フル充電で約 4 時間です。
- 7) 連続点灯時間は約 4～9.5 時間です。
- 8) バッテリー充電回数は約 500 回です。(充電回数が増えると電池は経たってきます。連続時間が短くなったり、照度が弱くなったりします。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者 及び 製造業者
株式会社 近藤研究所
〒454-0011
愛知県名古屋市中川区山王 1-5-10
TEL052-228-3117 FAX052-228-3116

(問い合わせ先)
株式会社 近藤研究所
〒454-0011
愛知県名古屋市中川区山王 1-5-10
TEL052-228-3117 FAX052-228-3116