



**2021 年 10 月 13 日改定(第 8 版)
*2020 年 6 月 5 日改定(第 7 版)

届出番号：14B1X10016300002

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 脊椎手術用器械 (JMDN 70963001)

New TREND スパイナルシステム PPS 用手術器械

【警告】

- ・本品は未滅菌であるため、使用前に【保守・点検に係る事項】に定める方法・条件で必ず洗浄及び滅菌してから使用すること。同様に、使用後は必ず洗浄及び滅菌を行い清潔に保管すること。
- ・本品は使用用途や機能に応じて適切に使用された場合でも、繰り返しの使用、洗浄、滅菌（感染症対策の場合は回数に関係なく）、経年劣化等に起因する金属疲労や腐食により材質が劣化し、破損する場合がある。（【保守・点検に係る事項】参照）

【禁忌・禁止】

- ・専用品以外への使用（【使用上の注意】「3.相互作用」の項参照）
- ・本製品を曲げ、切削、打刻等、二次加工（改造）は折損等の原因になるので絶対に行わないこと。
- ・本品の使用目的以外には使用しないこと。【使用目的又は効果】の項参照

【形状・構造及び原理等】

- 1.原材料/材質
ステンレス鋼、ニッケル-チタン合金、アルミニウム合金、シリコン樹脂、紫外線硬化樹脂、ポリフェニルスルホン樹脂、ポリエーテルイミド、ポリプロピレン

- 2.形状、構造
本品の形状は以下の通り。

ガイドワイヤー




ガイドワイヤースリーブ



ダイレーター



タップダイレーター

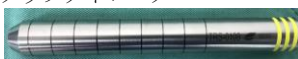

オウル キャニューレイトッド



NTR タップ キャニューレイトッド



KOSA タップ キャニューレイトッド



スクリウドライバー



Tハンドル



トルクレンチ



ロッドベンダー



ロッドホルダー



プラグドライバー キャニューレイトッド



ロッドキャリパー



プラグホルダー



プラグドライバー



アンチローテーター



タブプレーカー



プロテクションスリーブ



スクリウドライバースリーブ



C-レンチ



プラグケース



コンプレッションクランプ



コンプレッションスリーブ




リダクションクランプ



ラチェットハンドル



パンクチャーニードル

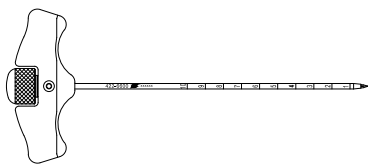

スリーブ付きキャニューレイトッドタップ



【使用目的又は効果】

本品は、脊椎固定術等の脊椎手術に用いる手動式手術器械であり、再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前

本品使用に先立ち、【保守・点検に係る事項】に記載の滅菌方法及び滅菌条件にて滅菌した上で使用すること。

2. 使用方法

＜ポリアクシャルスクリューの刺入＞

- (1) 刺入された汎用のニードル（骨生検針）の外筒を利用し、ガイドワイヤーを適切な位置に設置する。
- (2) ガイドワイヤースリーブ、タップダイレーター、ダイレーターの順にガイドワイヤーに沿って使用し刺入路を作成する。
- (3) ガイドワイヤーに沿ってオウル キャニューレイトッド、タップ キャニューレイトッドを使用し、刺入孔を作成する。
- (4) スクリュードライバーを T-ハンドルに取り付けておく。スクリュードライバーに適切なサイズのポリアクシャルスクリューを取り付け、X 線透視下にてガイドワイヤーに沿って刺入する。
- (5) ポリアクシャルスクリューのタブを保護する等の必要がある場合、タブを覆うようにスクリュードライバースリーブを挿入し、保護しておく。

＜ロッドの設置＞

- (1) 設置したポリアクシャルスクリューにロッドキャリパーの先端を挿入し、使用するロッドの長さを確認する。
- (2) 適切な長さ・形状のロッドを選択し、必要に応じてロッドベンダーを用い、ベンディングを行う。
- (3) ロッド端をロッドホルダーの把持部分に設置し把持する。スクリュードライバーを用い把持ボルトをトルクレンチにて締結する。
- (4) 把持したロッドをポリアクシャルスクリューの皮切より挿入し、スクリューヘッドに合わせて設置する。

＜プラグの締結＞

- (1) ロッドが正しい位置に設置されていることを X 線透視下にて確認した後、プラグホルダーを用いて、プラグをスクリューヘッドに設置する。
- (2) プラグを設置することが困難な場合、ロッドをスクリューヘッドに収めるため、スクリュードライバースリーブ、プロテクションスリーブを組み合わせ、リダクションクランプを用いることができる。
- (3) 必要に応じて、スクリュードライバースリーブにコンプレッションスリーブを取り付け、コンプレッションクランプを組み合わせ用いて脊椎の設置する部位のアライメントの調整を行う。
- (4) アンチローテーターをスクリューヘッドに被せ、トルクレンチに装着したプラグドライバーにてプラグの最終締結を行う。

【使用上の注意】

1. 注意事項(次の患者には慎重に適用すること)

- (1) クロイツフェルト・ヤコブ病（プリオン病）及び類縁疾患と診断された患者、あるいはその疑いのある患者に使用した場合、以下に示す厚生労働省が医療機器の消毒法としてあげている条件（クロイツフェルト・ヤコブ病診療マニュアル（改訂版）平成 14 年 1 月 24 日付）をもとに、医療機関内で責任をもって滅菌し、プリオンの不活化を行うこと。

2. 重要な基本的注意

- (1) 繰り返しの使用により（把持や解除等）性能が落ちる場合がある。
 - (2) 電気メスを用いた接触凝固はしないこと。〔感電、火傷、器械損傷防止のため〕
 - (3) 閉創する前に、体内に遺残物がないか確認すること。
 - (4) 苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄液やその他のアルカリ性、酸性洗浄液で本品を洗浄しないこと。〔変色又は腐食し作動不良を招く恐れがあるため〕
 - (5) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着した時は水洗いすること。
 - (6) 本品は落下や衝撃等に注意すること。
 - (7) 臓器、神経、血管近くで器具を使用する場合は特に注意すること。
 - (8) 本品は未滅菌で供給されるので、使用前に必ず洗浄及び滅菌すること。（【保守・点検に係る事項】の項参照）または、各医療機関により検証され確認された滅菌方法・条件で滅菌を行うこと。
 - (9) 手術器械の変形や破損、部品の脱落等の原因となるため、固い物への接触や衝撃、放り投げる、重量物をのせる等、粗雑に扱わないこと。
 - (10) 使用するインプラントの手技書を必ず参照のこと。
 - (11) プラグドライバーは、プラグの奥まで垂直に挿し込んで使用する事。先端部が破損し、破片がプラグ内に溜まってしまった場合は、必ず取り除くこと。
- ** (12) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- ** (13) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

3. 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること) 併用禁忌・禁止(併用しない事)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
専用品以外の製品との併用	器具が正常に動作しなくなるおそれがある。	器具の変形、破損。

4. 不具合・有害事象

- (1) 重大な不具合
・本品使用中における過負荷による手術器械の屈曲、切断、その他の破損
- (2) 重大な有害事象
 - 1) 感染症
 - 2) 本品使用に伴う神経学的合併症、骨の亀裂、骨折、穿孔
 - 3) 手術による神経組織の損傷、血管の圧迫、周辺組織・臓器の損傷、又は麻酔・手術による疼痛
 - 4) 本品の損壊や誤使用による患者や手術従事者の負傷又は手術時間の延長あるいは再手術

5. 高齢者への使用

高齢者は、骨が骨粗鬆化している場合が多く、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後に緩み等が起きたりする可能性があるので慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。変形や損傷の原因となりうる硬い物への接触や衝撃から避けるように注意して取り扱うこと。あるいは、他の製品と干渉しないように滅菌保管ケースに入れて保管すること。

2. 保管条件

高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1.滅菌

下記の方法と条件で滅菌した上で使用することを推奨する。

推奨滅菌方法・条件

- ・滅菌方法：高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）
- ・滅菌条件：121℃ 1.0 kg/cm² 20 分

2.使用者による保守点検事項

- 1)使用前に外観、さず、割れ、有害なまくれ、錆、ひび割れ、曲がり、歯の損傷、可動部の動き等、接合不良等の不具合がないか外観検査を実施すること。異常のあるものは新しいものと取り替えること。
- 2)性能の落ちたものは無理に使用せず、新しいものと取り替えること。
- 3)本品使用後は、洗浄、すすぎ等の汚染除去を行った後、血液等の異物が付着していないことを確認し、【保守・点検に係る事項】に示す滅菌方法および条件で滅菌を行い保管すること。
- 4)錆や変色を防ぐため以下のことを守って下さい。
 - ・使用後は速やかに洗浄し、付着物を取り除くこと。
 - ・酸性、アルカリ性の洗浄剤を避け、中性洗浄剤を用い、脱イオン水又は脱塩素水等で十分すすぎ、乾燥させること。
 - ・汚れ又は洗浄剤が残った状態で滅菌しないこと。
 - ・金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。
- 5)可動部のある製品は動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。

【主要文献及び文献請求先】

ユナイテッド・オーソペディック・ジャパン株式会社

TEL：045-620-0741

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ユナイテッド・オーソペディック・ジャパン株式会社

〒220-0004

神奈川県横浜市西区北幸 2-9-40 銀洋ビル

TEL：045-620-0741