

添付文書

医療機器製造販売届出番号:13B3X10395000003

2026 年 4 月 7 日 作成 (第 1 版)

類別:医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 一般の名称:家庭用遠赤外線血行促進用衣(71105001)
リカバリーウェア DK ダブルニット

【禁忌・禁止】
自分自身で着脱することができない患者[何らかの症状が発生した場合にそれを悪化させる危険性が高いため]
・本製品に対するアレルギーを持つ患者[アレルギー症状を引き起こす危険性が高いため]
・装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患
創傷のある方[接触により症状が悪化する恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】
衣類形状の医療機器であり、上半身用(上腕部被覆)・下半身用(大腿部被覆)の種類がある。

【形状・構造】
メンズ:ハーフパンツ、ビッグシルエット半袖丸首 T シャツ、
長袖丸首 T シャツ、メンズボトムス、メンズ長袖トップス、
メンズボトムス
レディース:長袖トップス、長袖トップス、レディースボトムス、
レディースポートネックトップス、レディースボトムス

単位:cm

・メンズハーフパンツ




	M	L	LL	3L
ウエスト	76~84	84~94	94~104	100~110

・メンズビッグシルエット半袖丸首 T シャツ




	M	L	LL	3L
チェスト	88~96	96~104	104~112	108~116

・メンズ長袖丸首 T シャツ

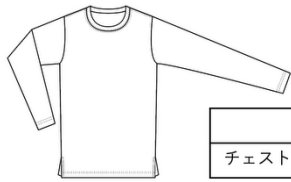

	M	L	LL
チェスト	88~96	96~104	104~112

・メンズボトムス

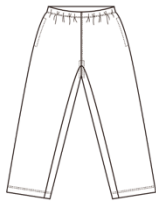

	M	L	LL
ウエスト	76~84	84~94	94~104

・レディース長袖トップス



	M	L	LL
バスト	79~87	86~94	93~101

・レディースボトムス




	M	L	LL
ウエスト	64~70	69~77	77~85

・メンズ長袖トップス




	M	L	LL
チェスト	88~96	96~104	104~112

・メンズボトムス

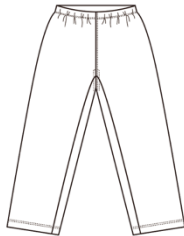


	M	L	LL
ウエスト	76~84	84~94	94~104

・レディースポートネックトップス

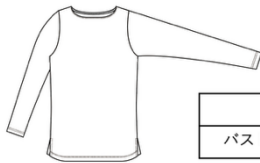

	M	L	LL
バスト	79~87	86~94	93~101

・レディースボトムス

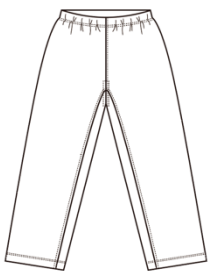

	M	L	LL
ウエスト	64~70	69~77	77~85

〔原理〕

本製品は、特殊な加工をした糸を生地にし、一定程度の遠赤外線を輻射する素材を使用した製品であり、着用することで遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する衣類型の医療機器である。

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこりなどの症状を改善する。

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉のハリ、コリの緩和
- 筋肉の疲れの軽減

【使用方法等】

- ・本品は再使用可能である。
- ・衣類として素肌に直接着用する。
- ・日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能である。

【使用上の注意】

- ・本品に破損がないことを確認すること。
- ・睡眠時の着用は、発汗作用が高まることから、十分な水分補給を行うこと。
- ・着用中に身体に何らかの異常(かゆみ、かぶれなど)を感じた場合は、ただちに使用を中止すること。
- ・湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。
- ・本製品を洗濯する際は、洗濯絵表示に従って行うこと。
- ・色物は色落ちすることがあるので他の白物との同時洗濯や、水に長時間のつけ置きは避けること。
- ・家庭洗濯時の衣類乾燥機の使用は避け、形を整えて干すこと。
- ・表面の毛羽は燃えやすいので、コンロやストーブなどの火元に近づく場合は、十分注意すること。
- ・本製品の形状を変えたりするなど、加工、修理を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管してください。
- ・有効期間 2年

【保守・点検に係る事項】

- ・本品は繰り返し使用可能ですが、素材の湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますのでご注意ください。

【包装】

1枚/1袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・ 製造販売業者
UND Ventures 株式会社
東京都中央区日本橋室町 1-11-12 日本橋水野ビル 7 階電
話:03-5879-2743
- ・ 販売業者
平松工業株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原 2-2-2 新大阪センシティー4F
電話:06-6395-1141