

ミニダム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ 本品を再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状：2穴を有する枠付きのシリコン製のシートであり、2歯に被せることにより、歯間の簡易防湿ならびに歯肉保護の環境を確保する。
2. 原材料：ポリジメチルシロキサン

【使用目的又は効果】

歯科治療中の口腔内における手術野の隔離に用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- ① 治療部位を清掃する。
- ② 本品の両側のタブを軽く引きながら（Fig.1）、治療している歯の上にかぶせる。
このとき、本品の歯間部（Fig.2のA）が治療部位ならびに周辺歯肉を適切に保護するように、歯肉に向かって押しつける。
（Fig.2）
- ③ 指を放し、本品をもとの状態にもどす。
（Fig.3）
- ④ 本品を歯頸部に向かって折り畳む（Fig.4）
- ⑤ 本品が適切に固定されていることを確認し、必要に応じて調節する。（Fig.5）



Fig.1



Fig.2



Fig.3

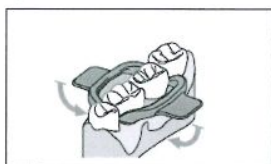


Fig.4

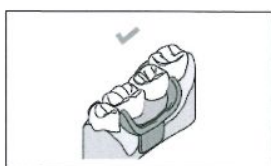


Fig.5

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- ① 隣接歯が密接している場合は、本品が入る程度にウェッジを使って歯間を広げること。
- ② 必要に応じて、例えば歯科用コットンロールや吸引により、口腔内を乾燥した状態にすること。

【使用上の注意】*

1. 使用注意

デンタルフロス又は他の器具等で本品を傷つけたり、破損しないように注意すること。

2. 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- ② 本品の原材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品は高温多湿及び直射日光を避け、室温で保管すること。

（有効期間）

本品は外装に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証〔当社データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **DMG**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：デーエムゲー社（国名：ドイツ）
DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik
GmbH