


IP フィルムホルダー

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

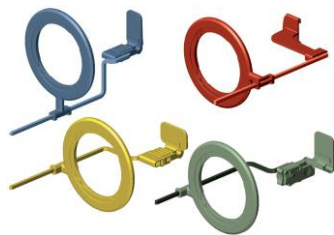

2. 種類および構成

種類（カラー）	構成品
前歯用（青）	インジケーターアーム、 照準リング、 バイトブロック
バイトウィング用（橙）	
臼歯用（黄）	
エンド用（緑）	

3. 成分

ナイロン 12、チタン

4. 原理

歯科 X 線撮影時に、イメージングプレートをバイトブロックに挟み、患者の口腔内に挿入すると共に、本体の凹凸部を噛むことにより、X 線フィルムを適切な位置に支持及び配置する。

【使用目的又は効果】

歯科 X 線画像撮影の際に、配置されたイメージングプレートに対して X 線管を適切に位置合わせするためのガイドとして使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- ① イメージングプレートを準備する。
- ② バイトブロックにイメージングプレートを取り付ける。
- ③ バイトブロックにインジケーターアームを差し込む。
- ④ インジケーターアームに照準リングを差し込む。
- ⑤ 撮影部位にイメージングプレートをあわせてバイトブロックを噛ませて固定する。その際、必要に応じてコットンロールを併用する。照準リングに X 線装置のコーン部を合わせて撮影を行う。

2. 使用方法に関する使用上の注意

- ① 本品は必ず滅菌済みのものを使用すること。
- ② 使用後は、本品を分解して洗浄、消毒、すすぎ、乾燥、蒸気滅菌を行うこと。
- ③ 変形、損傷、変色、腐食等の異常がないか確認すること。異常がある場合は、使用を中止すること。
- ④ アルデヒドを含む洗浄剤および消毒剤を使用しないこと。
- ⑤ 蒸気滅菌は 138℃ を超えないこと。

【使用上の注意】

1. 使用上の注意

口腔内で使用される部分で患者の口腔粘膜等を傷つけないよう、十分配慮すること。

2. 重要な基本的注意

- ① 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しない事。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

① 保管方法：

本品は、高温、多湿、直射日光、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨナガ**

住 所：〒110-8507

東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

画像情報部

電話番号：03-3845-2925

F A X 番号：03-3845-2926

製造元：Duerr Dental SE（国名：ドイツ）