

歯科材料 3 義歯床材料
管理医療機器 義歯床用短期弾性裏装材 JMDN コード：34769000

コー・ソフト

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び成分：

構成品	性 状	成 分
粉末	淡桃色の粉末	ポリエチルメタクリレート、色素 他
液	無色透明の特異臭のある液体	サリチル酸ベンジル、アセチルケン酸トリブチル、アルコール類、香料 他
ループリカント（分離剤）	無色透明液体	鉱油、香料

2. 原理：

粉末と液を混合及び練和することにより、ポリマー成分に可塑剤が浸透、膨潤してゲル化する。


【使用目的又は効果】

義歯床の粘膜面に短期間装着する

【使用方法等】

1. 使用方法

- ① 患者の口腔内から義歯床を外し、口腔内を洗浄する。
- ② 義歯床の裏装する部分を一層削り、表面を粗くする。義歯床を十分に洗浄し、乾燥させる。
- ③ 義歯床の唇側及び頬側面に分離剤を塗布する。義歯床の辺縁から 3 mm 以内には塗布しないこと。レジン歯を使用している場合は、本品がレジン歯に接しないよう保護するために、分離剤をレジン歯に塗布する。
- ④ 標準混和比は、粉末 11g に対して液 8mL である。液を混和カップに入れた後粉末をゆっくり加えて、付属のスパチュラを用いて 30 秒以内に混和する。

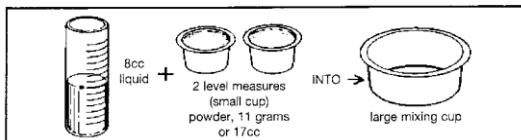

- ⑤ 裏装する部位に、混和した本品を均等に塗布する。
- ⑥ 義歯床を口腔内に装着し、軽く咬合させる。3 分後に患者の唇及び頬の動きを観察し、義歯床を口腔内から取り出して洗浄した後、義歯床辺縁部の調整を行う。
- ⑦ 再度義歯床を患者の口腔内に戻し、しっかり咬合させ、その位置で固定する。

- ⑧ 5 分後義歯床を取り出し、水で洗浄した後余剰な部分を取り除き、辺縁部分をなめらかにして仕上げる。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- ① 粘膜が炎症を起こしている場合、又は被圧変位置に大きな差のあるときには、あらかじめ粘膜調整を行うこと。
- ② 本品は口腔内で硬化させること。テーブル上で硬化させると変形の原因になる。口腔内に戻さない場合は、温水（約 40～50℃）の中に浸漬して硬化させること。
- ③ 本品を練和する時には泡が生じないように、30 秒以内で行うこと。
- ④ 使用前に、本品粉末の容器をかるく振ること。

【使用上の注意】

1. 使用注意**

- ① 本品は可燃性なので、火気の近くで使用しないこと。また、火気の近くや高温となる場所（直射日光が当たる場所等）に放置しないこと。
- ② 本品を使用する際には、適切な換気（1 時間あたり数回の換気）を行うこと。
- ③ 本品の硬化物を切削、研磨する際には、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないようにすること。
- ④ 感染防止のため、計量カップ及びスパチュラは清浄なものを使用すること。
- ⑤ 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ⑥ 他の製品と混用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- ② 本品又は本品に含まれる成分に対してアレルギー既往歴のある患者には使用しないこと。
- ③ 本品又は本品に含まれる成分に対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- ④ 本品又は練和物は、適用部位以外の粘膜組織に付着しないように注意すること。万一付着した場合には、直ちにアルコール綿等で拭いた後、多量の流水で洗浄すること。
- ⑤ 本品又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ①液は火気、熱源、高温及び直射日光を避けて保管すること。＊
- ②本品は、25℃以下の常温で乾燥した暗所に保管すること。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

(有効期限)

本品の使用有効期間は製造日から3年。
容器に記載されている使用期限までに使用すること。
(使用期限は自己認証〔当社データ〕による。)

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：ジーシーアメリカ社
GC America Inc.
(国名：アメリカ合衆国)