


機械器具 51 医療用嘴管及び液体誘導管
管理医療機器 歯科用吸引管 JMDN コード 70317000

バキュームチップ

【形状・構造及び原理等】

（形状・構造）

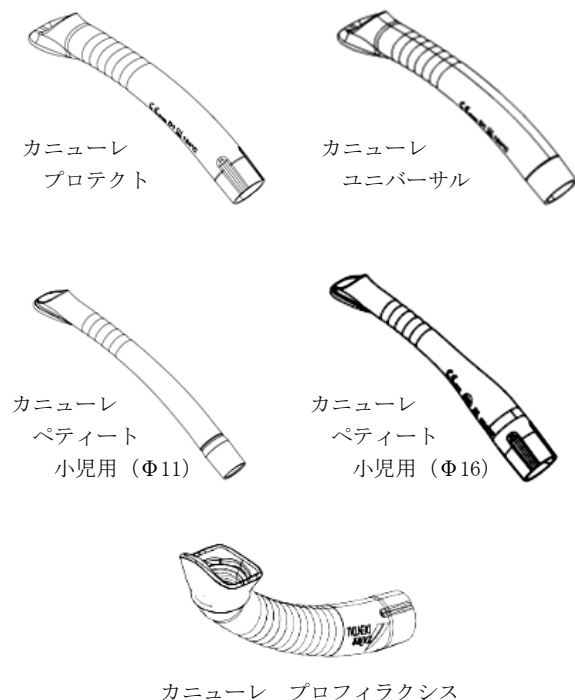

（原材料）

プロテクト	ポリプロピレン
ユニバーサル	
ペティート 小児用 (Φ11)	
ペティート 小児用 (Φ16)	
プロフィラックス	ナイロン 6

（原理）

歯科用ユニットのバキュームホースに接続し使用する。
歯科用ユニットの吸引器を作動することで、口腔内の水分や
切削片等を先端部より吸引し除去する。

【使用目的又は効果】

歯科用ユニットの吸引器に連結し、口腔内の水分や切削片等を除去するために使用する。

【使用方法等】

（使用方法）

- ① 歯科用ユニットのバキュームホースにしっかりと接続する。（内径Φ16mmのバキュームホースに適用する。ただし、ペティート 小児用（Φ11）は内径Φ11mmのバキュームホースに適用する。）

備考：プロフィラックスは、回転ヘッドを取付けた後、ホースに接続する。回転ヘッドは必要に応じて向きを変える。

- ② 歯科用ユニットの吸引器を作動することで、口腔内の水分や切削片等を先端部より吸引する。

【使用上の注意】

- ① 使用中は抜けないように、歯科用ユニットのバキュームホースにしっかりと差し込むこと。
- ② 使用前には、汚れ、傷、曲がり、破損等の有無を点検し、洗浄・消毒及び滅菌を行うこと。
- ③ 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等を除去し、感染防止のために洗浄・消毒を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 他からの汚染を受けないようにして保管すること。
- ② 目視にて、摩耗・損傷・破損を確認し、必要に応じて廃棄すること。
- ③ 廃棄する際は、消毒や滅菌を行うこと。

【保守・点検に係る事項】

（洗浄/滅菌方法）

- ① 必要に応じ、殺菌性の使い捨てワイプ等で汚物を除去し、洗浄・消毒を行うこと。
- ② 洗浄・消毒器は各メーカーの指示に従って使用すること。
- ③ 消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。
- ④ 洗浄・消毒後は、残留汚れを注意深く確認し、必要に応じて洗浄・消毒を繰り返し行うこと。
- ⑤ 洗浄・消毒剤は水で十分にすすぎ、乾燥させること。
- ⑥ 高圧蒸気滅菌以外の滅菌は行わないこと。
- ⑦ 高圧蒸気滅菌は 134℃で 5 分間行うこと。
備考：プロフィラックスは、回転ヘッドを取外し、洗浄・消毒及び滅菌を行うこと。
- ⑧ 134℃を超えないこと。（乾燥工程は行わないこと。）
- ⑨ 滅菌中は金属との接触を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**

住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：デュール デンタル社（ドイツ国）
Duerr Dental SE *