

機械器具 2 医療用照明器
一般医療機器 汎用歯科用照明器（JMDN コード：12351000）

L ライト

【警告】


本製品の周辺に、患者以外（特に子供）を近づけないこと。やむを得ず近づく場合、患者以外の安全にも配慮すること。

[本製品の転倒による怪我の防止]


【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造等〕


U（ユニット取付タイプ）
（A アーム）

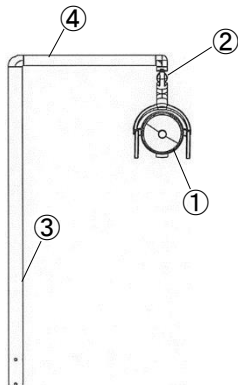


（B アーム）

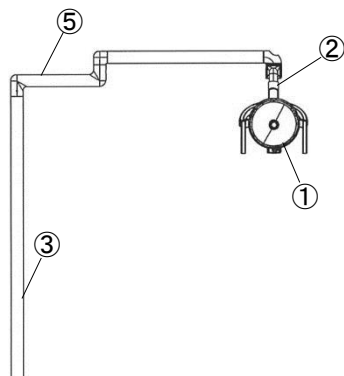

F（床固定タイプ）

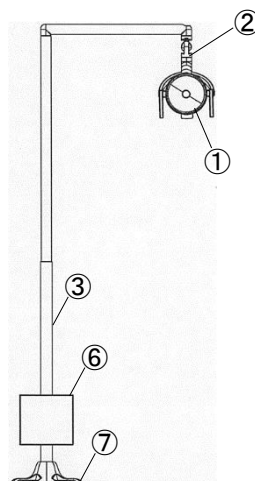

C（天吊りタイプ）

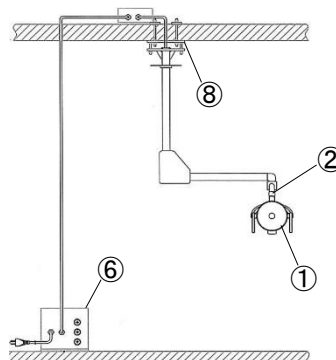

各部の名称

- | | | |
|----------|-----------|------|
| ①ライトヘッド | ④A タイプアーム | ⑦ベース |
| ②バランスアーム | ⑤B タイプアーム | ⑧天板 |
| ③ポール | ⑥電源 BOX | |

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

〔電氣的定格〕

・U (ユニット取付タイプ)

電源電圧：AC12V

周波数：50Hz／60Hz

電源入力：26VA

・F(床固定タイプ) / C (天吊りタイプ)

電源電圧：AC100V

周波数：50Hz／60Hz

電源入力：80VA

〈動作保障条件〉

下記の条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度：10～35℃

相対湿度：30～75%

気 圧：700～1,060hPa

【使用目的又は効果】

歯科診療時に口腔内を照明する。

【使用方法等】

1) 取付・設置 (組立て・据え付け)

機器の取付・設置は専門の担当者(当社又は当社指定の業者)が行ってください。詳細は、U (ユニット取付タイプ) は取り付ける機種の設定管理基準書、その他は据付説明書に従うこと。

2) 操作方法又は使用方法

機器の詳細な操作方法及び使用法は付属の取扱説明書を参照すること。U (ユニット取付タイプ) は取り付けるユニット取扱説明書も参照すること。

【使用上の注意】

〈使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)〉

他の治療において、強い光に曝露しないように注意喚起されていないか、また既往歴として光線過敏症がないかを患者に確認し、該当する場合は治療部位以外(皮膚等)に光が当たらないように注意して使用すること。

〈重要な基本的注意〉

- 1) 前面フードの落下による怪我の防止のため、使用前には前面フードが確実に取り付けられていることを確認すること。

- 2) 点灯中及び消灯直後は、前面フード、本体およびその周辺部が高温になっている場合があり、やけどのおそれがあるので触れないこと。

- 3) 点灯中は照射光を直視したり、患者の目にあてないこと。

- 4) 使用中に体が過敏に反応し、めまいや吐き気などを引き起こした場合は、照度を落としたり、必要な時以外は消灯するなど、長時間強い光が目に入らないようにすること。

- 5) 薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が変質したり、塗装が剥れ、内部金属が腐食する恐れがあるので、速やかに清拭すること。

- 6) 機器の清掃に用いる洗剤は、取扱説明書で指定したものを使用すること。

〈不具合・有害事象〉

特になし

【保管方法及び有効期間等】

〈保管の条件〉

下記の条件にて保管すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度：-10～60℃

相対湿度：10～90%

気 圧：700～1,060hPa

〈耐用期間〉

10年間。(自己認証(当社データによる。))

※正規の使用法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項（日常点検）〉

点検頻度	点検内容
始業前	前面フードが確実に取り付けられていることの確認。
	前面フードに変形・ひび割れ等の異常がないことの確認。
	取っ手が確実に取り付けられていることの確認。
	スイッチ等によるランプの点灯・消灯確認。
	ランプの照度調節の確認。
	ライトヘッド、各種アームが正常に作動することの確認。
患者ごと	取っ手の消毒、滅菌。
	付着した汚れ・薬品・薬剤の除去。

詳細は取扱説明書を参照すること。

〈業者による保守点検事項〉

1年ごとの定期点検を当社または当社の指定する業者に依頼すること。

詳細は取扱説明書を参照すること。

【主要文献及び文献請求先】

特になし

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

吉田精工株式会社

電話番号 0299-57-0111（代）

〔製造業者〕

吉田精工株式会社

〔販売業者（販売店）〕

株式会社ヨシダ

住所：〒110-8507

東京都台東区上野7-6-9

T E L : 03-3845-2941（機械部）

F A X : 03-3845-2948（機械部）