

機械器具 2 医療用照明器
一般医療機器 汎用歯科用照明器（JMDN コード：12351000）

L08 ライト

【警告】

本製品の周辺に患者以外(特に子供)を近づけないこと。
やむを得ず近づける場合、患者以外の安全にも考慮すること。
[挟み込みによる怪我の防止]


【禁忌・禁止】

<併用医療機器>

本製品の電源が入った状態で、本製品と電気メスを同時に使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

製品外観図

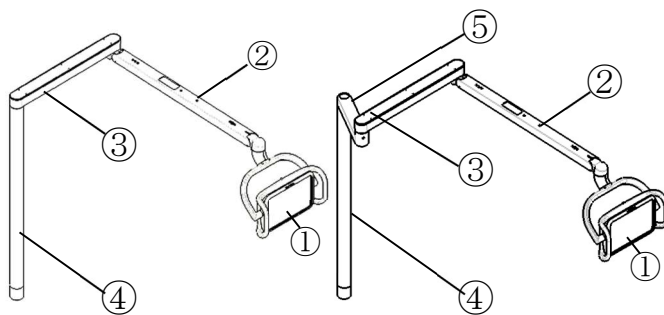

<A タイプ>

<B タイプ>

各部の名称

- ①ヘッド ②バランスアーム ③第一アーム
④ライトポール ⑤クランクアーム

〔電気的定格〕

電源電圧：18.5VAC

入 力：30VA

〔動作保証条件〕

下記の条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度：10～35℃

相対湿度：30～75%

気 圧：700～1,060 hPa

〔原理〕

電気を制御し、無景灯により歯科診療時に口腔内を照明する。また、調光機能により光量を調節可能である。

【使用目的又は効果】

歯科診療時に口腔内を照明する。

【使用方法等】

①取付・設置(組立て・据え付け)

機器の取付・設置は専門の担当者（当社又は当社指定の業者）が行うこと。詳細は、取り付けのユニットの設置管理基準書に従うこと。

②操作方法又は使用方法

機器の詳細な操作方法及び使用法は附属及び取り付けるユニット取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

<相互作用>

<併用禁忌>

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
電気メス	併用する場合は必ず接続中のユニットの電源を切った状態又は電気メス使用可能モードに切り替えること。	電磁干渉により本製品が誤動作するおそれがあるため。

<不具合・有害事象>

特になし

【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

下記の条件にて保管すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度：-10～60℃

相対湿度：10～90%

気 圧：700～1,060hPa

<耐用期間>

10 年間。(自己認証(当社データによる。))

※正規の使用法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

【保守・点検に関わる事項】

<使用者による保守点検事項(日常点検)>

No.	点検内容	点検頻度
1	前面パネルに変形・ひび割れ等の異常がないことの確認。	始業前
2	センサ等によるランプの点灯・消灯確認。	始業前
3	ランプの照度調節の確認。	始業前
4	ヘッド、各種アームが正常に作動することの確認。	始業前
5	可動部のガタつき、異音、異臭(焦げ臭くないか)の確認。	患者ごと
6	取っ手の清掃・滅菌。	患者ごと
7	コード類の状態の確認	一ヶ月ごと
8	電気関係ソケット類の確認	一ヶ月ごと

詳細は取扱説明書を参照すること。

<業者による保守点検事項>

1 年毎の定期点検を当社又は当社の指定する業者に依頼すること。

詳細は取扱説明書を参照すること。

【主要文献及び文献請求先】

特になし

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 吉田精工株式会社 電話番号 0299-57-0111 (代)
販売業者 株式会社ヨシダ 住所: 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL: 0800-170-5541 (コンタクトセンター) ※携帯電話からは03-6880-2155 におかけください。