

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 送水吸引チューブ JMDN 70355000

インプラントオチューブ



再使用禁止

**** 【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止
2. 本品を販売名「インプラントオ」以外に接続して使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

<外觀>

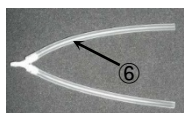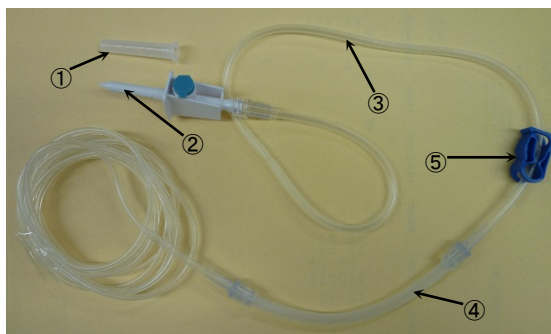

＜名称及び機能＞

NO.	名 称	機 能
①	キャップ	イリゲーションパツグ接続部を保護する。
②	イリゲーションパツグ接続部	イリゲーションパツグに接続する。
③	輸液チューブ	イリゲーションパツグからの輸液を送水する。
④	メインチューブ	インプランタのホヅフ部分にはめ込む。
⑤	クランプ	水量を調整する。
⑥	ハンドピース接続用チューブ	歯科用ハンドピースに接続する。

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジオクチル（フタル酸ジ-2-エチルヘキシル））を使用。

【使用目的又は効果】

本品は電動式骨手術器械(販売名「インプラントオ」)の送水ポンプ及び歯科用ハンドピースに接続し、接続したハンドピース先端より術野への送水を行う。

【使用方法等】

機器の詳細な操作方法及び使用法は、付属の取扱説明書及び電動式骨手術器械(販売名「インプラントオ」)に付属している取扱説明書を必ずお読みください。

1. 本品をパッケージから取り出す。
2. 本品の輸液チューブの端を歯科用ハンドピースの注入接続部等に接続する。
3. 本品のメインチューブをインプラントオ、ポンプ部分にはめ込む。

4. 本品のキャップを取り外し、イリゲーションバッグ接続部をイリゲーションバッグに差し込む。
5. インプラントオの操作方法に従い、送水量を決定し、送水を行う。また必要に応じて、クランプを用いて量を調節する。

****【使用上の注意】**

詳細については取扱説明書及び電動式骨手術器械(販売名「インプラントオ」)に付属している取扱説明書を必ずお読みください。

1. 本品は滅菌済み製品であるため、開封は使用直前に行い、かつ無菌的に取り扱うこと。
2. ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジオクチル(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがあるので注意すること。
3. 本品をハンドピースに接続する場合、接続部にしっかりとめ込み、クリップ(ハンドピースに付属)を使用すること。

****【保管方法及び有効期間等】**

＜保管方法＞

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れのない場所に保管すること。
3. 水濡れ、高温になる場所や直射日光の当たる場所を避けて保管すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

＜有効期間＞

本品は包装に記載の有効期間内に使用すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及びお問い合わせ先

株式会社吉田製作所

TEL : 03-3631-2204(海外事業部)

FAX : 03-3635-1060(海外事業部)

外国製造業者: アンソジール社【Anthogyr S.A】フランス

販売業者

クロスフィールド株式会社

TEL : 03-5625-3306

FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 017-5