

機械器具(65) 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド JMDN 16195000
(歯科用マトリックスウェッジ JMDN 16370000)

再使用禁止

フェンダーウェッジ・プロ&フェンダーメイト イントロキット

- * **【禁忌・禁止】**
再使用の禁止

- * **【使用上の注意】**
歯間に差し込めない場合は、種類を変えるか使用を止めてください。

【形状・構造及び原理等】

本製品は、2つの医療機器を組み合わせたものである。

	販売名	一般的名称	届出番号
①	フェンダーウェッジ・プロ	歯科用マトリックスウェッジ	13B1X00133000029
②	フェンダーメイト	歯科用マトリックスバンド	13B1X00133000028

* **【保管方法及び有効期間等】**

- ・常温常湿で保管すること。
- ・直射日光が当たる場所には保管しないこと。

* **【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売者及びお問い合わせ先
株式会社吉田製作所
TEL : 03-3631-2204(海外事業部)
FAX : 03-3635-1060(海外事業部)


外国製造業者:ダイレクタ社
【DIRECTA AB】 スウェーデン

販売業者
クロスフィールド株式会社
TEL : 03-5625-3306
FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 081-2

外観図

①フェンダーウェッジ・プロ

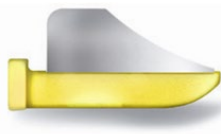

種類	色
SS	パープル
S	オレンジ
M	グリーン
L	イエロー

②フェンダーメイト



	種類	色
レフト	Regular	グリーン
	Narrow	ライトグリーン
ライト	Regular	ブルー
	Narrow	ライトブルー

【使用目的又は効果】

- ①フェンダーウェッジ・プロ
充填物の挿入時に歯をわずかに分離させるために歯頸部に設置する。
- ②フェンダーメイト
修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるステンレス製のバンドで、修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。

【使用方法等】

- ①フェンダーウェッジ・プロ
1. 適切な種類のフェンダーウェッジ・プロを、修復する歯の歯頸部の歯間に差し込む。
 2. ダイヤモンドバー等で修復する歯を形成する。
 3. 形成後、フェンダーウェッジ・プロを抜き取る。
- ②フェンダーメイト
1. 適切な種類のフェンダーメイトを、修復する歯の歯頸部の歯間に差し込む。
 2. 使用する修復充填材を、その使用方法に従って窩洞に充填し、圧接形成する。
 3. 使用する歯科重合用光照射器の使用方法に従って光照射し、修復充填材を硬化させる。
 4. 修復充填材の硬化後、フェンダーメイトを抜き取る。