


機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 再使用可能な歯科用吸引カニューレ JMDN 38759000

ケアシールド

【形状・構造及び原理等】

＜外観＞

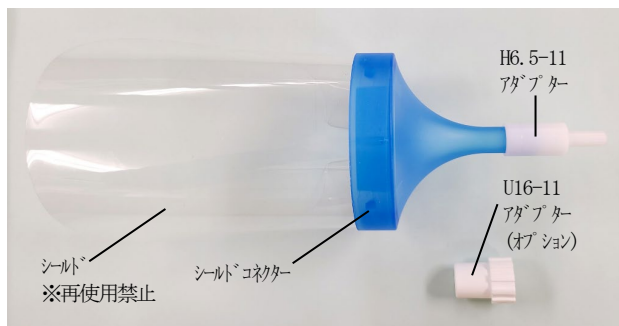

＜アダプター種類＞


種類	機能
H6.5-11 アダプター	シールドコネクタをΦ6.5mm の歯科専用装置に接続する。オートクレーブ滅菌可能。
U16-11 アダプター (オプション)	シールドコネクタをΦ16mm の歯科専用装置に接続する。オートクレーブ滅菌可能。

【使用目的又は効果】


本製品は、非能動型の吸引装置(歯科専用装置)に連結して用いる管状の歯科用器具である。口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は滅菌後に再使用する。

【使用方法等】


1.シールドをシールドコネクタ開口部の溝に差し込み、固定を確認する。

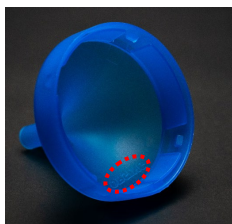

(1) シールドコネクタの ORSING のマークを確認する。

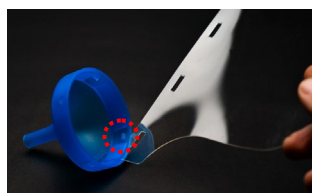

(2) ORSING のマークを起点にシールドコネクタの溝にシールドを固定する。

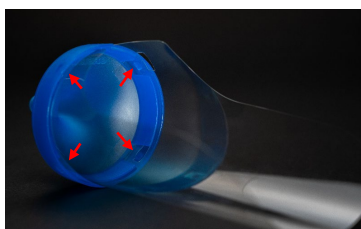

(3) 4 か所の溝にシールドを付けたら完了。

2.歯科専用装置の吸引機にしっかり接続して吸引する。

(接続が不安定な場合は付属のアダプターを使用する。)

3.使用後はシールドを取り外し、以下の手順でシールドコネクタ、アダプターに洗浄、消毒、滅菌を施し保管する。

- (1). 使用後、シールドコネクタをアルコールで拭く。
- (2). ウオッシャーディスインフェクターや超音波洗浄機で洗浄する。
- (3). ウオッシャーディスインフェクターや薬液で消毒する。
- (4). オートクレーブで滅菌する。

滅菌条件 (例) オートクレーブ 134℃ 3 分以上 (乾燥工程不可)

【使用上の注意】

- ・歯科専用装置に接続する時は、抜けないようにしっかりと差し込むこと。
- ・本品の使用前に亀裂、変色等の異常がないかを確認すること。
- ・使用前に必ず洗浄、消毒し、滅菌すること。
- ・シールドの再使用禁止。
- ・使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品が乾燥しないように、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに洗浄すること。
- ・薬液にて消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。薬剤の種類によっては、樹脂素材の劣化の原因になることがある。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、材質の劣化の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・滅菌方法: オートクレーブ
- ・使用前・使用後の点検:
使用前・使用後は、亀裂、変色等の異常がないか確認すること。これらがあつた場合は、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及びお問い合わせ先
株式会社吉田製作所
TEL : 03-3631-2204 (海外事業部)
FAX : 03-3635-1060 (海外事業部)

外国製造業者: ジェイ. エイチ. オーシング社
【J. H. ORSING AB】スウェーデン

販売業者
クロスフィールド株式会社
TEL : 03-5625-3306
FAX : 03-3635-1060