


機械器具 36 医療用ピンセット  
一般医療機器 ピンセット JMDN 35079001

## DLC ブラック マイクロ ピンセット

### 【形状・構造及び原理等】

#### ＜外観＞

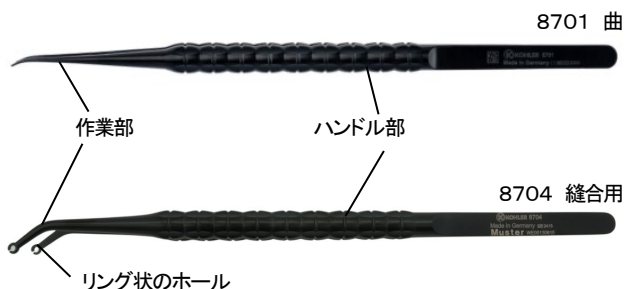

#### ＜材質＞

作業部、ハンドル部：ステンレス鋼（DLC コーティング）

### 【使用目的又は効果】

保持する物体を閉じて挟む2枚の刃をもつ器具である。ハンドルは永久的に結合している。

### 【使用方法等】

1. 本品は未滅菌であり、洗浄及び滅菌してから使用する。
2. ハンドルを親指と人差し指等で挟むように持ち、作業部で組織等を把持する。縫合用は、組織を把持したままリング状のホールに縫合針を通す。
3. 使用後は洗浄、滅菌を施し保管する。  
滅菌条件(例)：オートクレーブ 134～137℃ 4 分以上（乾燥工程：10 分）

### 【使用上の注意】

- ・作業部が摩耗している場合は使用しないこと。
- ・本品に汚れ、変形、キズ、その他の機能低下、異常がある場合は、使用を中断し、適時新しい商品と交換すること。
- ・破損・曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ・本品を曲げ、ハンドル部に切削、打刻（刻印）等の二次加工（改造）することは、折損の原因となるので絶対に行わないこと。
- ・長期の使用による金属疲労や磨耗等の劣化が生じた場合は、適時交換すること。
- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いをしないこと。
- ・初期不良を除き、本品の破損や折れは保証の対象外とする。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### ＜保管上の注意＞

- 1) 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、室温（許容温度：5～40℃）で保管すること。
- 2) 清潔で乾燥した場所に荷重のかからない状態で保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

#### ＜洗浄、消毒、滅菌の注意＞

- ・本品は未滅菌品であり、必ず洗浄・滅菌した後に使用すること。
- ・本品は錆びにくい金属ではあるが、使用方法、環境によっては錆びることがある。以下の使用上の注意を守ること。

- ・禁忌の薬剤：次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。また、漂白剤は使用しないこと。
- ・家庭用洗剤の使用禁止：家庭用洗剤は、金属の劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ・機能水の使用禁止：超酸化水（超酸化性水）などは、金属を腐食させ劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。
- ・使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ・洗浄、消毒には、精製水を使用すること。
- ・薬液にて消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材の劣化の原因になることがある。
- ・洗浄、消毒後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆や材質の劣化の原因となることがある。
- ・磨き粉、金属ウール・金ブラシの使用禁止：錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
- ・初期不良を除き、不適切な使用による作業部の破損や折れは保証の対象外とする。
- ・滅菌は、必ずバリデート（妥当性確認された工程）にて行うこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、医療用廃棄物として適切に処理すること。

#### ＜使用者による保守点検事項＞

- ・使用前・使用後の点検：使用前・使用後は、曲がっていないか、作業部やハンドル部に破損、ヒビ、大きなキズや腐食などがないか確認すること。これらがあつた場合は、使用せず廃棄すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及びお問い合わせ先

株式会社吉田製作所

TEL：03-3631-2204（海外事業部）

FAX：03-3635-1060（海外事業部）

外国製造業者：コーラー社

【Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG】ドイツ

販売業者

クロスフィールド株式会社

TEL：03-5625-3306

FAX：03-3635-1060

文書番号 FF 添 24-060